

FI - FINNISH

Käyttö
Tarkista, että kondomipakkaus on ehjä ja että kondomin viimeinen käyttöpäivä ei ole kulunut ohi. Avaa pakkaus varovasti ja ota kondomi esille. Varo vahingoittamasta kondomia kynsillä tai koruilla. Ota kondomi pois välittömästi ennen käyttöä. Vedä kondomi erektoituneen ja kuivan peniksen päälle ja rullaa kondomi vatsaa kohti peniksen tyveen saakka (tee tämä ennen kontaktia kumppanin kanssa, sillä siemennestettä voi tulla ulos erektion alussa). Älä käytä kondomia, jos sinusta tuntuu, että se luistaa, puristaa tai painaa liikaa penistä, koska tämä voi johtaa kondomin repeytymiseen. Laita kondomikaäre pois ja käytä kondomia. Kondomi mukautuu penikseen. Varmista, että kondomi pysyy paikallaan seksin aikana. Jos kondomi irtaoo, avaa uusi kondomi ja laita se päälle ennen seksin jatkamista. Jos näin käy, hakeudu lääkärin hoitoon. Siemensyöskyn jälkeen on oltava varovainen ja kondomia on pidettävä peniksen tyvessä, kun vedät penistä ulos. Odota, kunnes penis on vedetty kokonaan ulos, ennen kuin poistat kondomin. Käytön jälkeen hävitä kondomi hygieenisesti yleisjätteen mukana.

Tärkeää tietoa
Jos kondomissa tai pakkauksessa esiintyy näkyviä vaurioita, älä käytä sitä. Hävitä vaurioitunut kondomi ja käytä uutta kondomia vahingoittumattomasta pakkauksesta. Nämä kondomit eivät ole joustavia! Älä pidennä, täytä ilmalla tai venytä niitä. Tietyt lääkkeet voivat vahingoittaa kondomia. Kysy lääkäriltäsi lääkkeiden ja kondomin yhteensopivuudesta. Samaa kondomia ei saa koskaan käyttää toiseen kertaan. Jos et ole varma, oletko käyttänyt kondomia oikein, ota välittömästi yhteyss lääkärisi ja kysy neuvoa mahdollisimman pian. Tee tämä mieluiten 24 tunnin sisällä, mutta viimeistään 72 tunnin sisällä.

PL - POLISH

Aplikacja
Sprawdź, czy opakowanie prezerwatywy jest nienaruszone i czy nie upłynęła data ważności. Ostrożnie otwórz opakowanie i wyjmij prezerwatywę.
Uważaj, aby nie uszkodzić jej paznokciami lub biżuterią. Wyjmij prezerwatywę bezpośrednio przed użyciem.
Naciągnij prezerwatywę na wzwiedzionego i suchego penisa, a następnie pociągnij obrożce w kierunku brzucha (zrób to przed zbliżeniem z partnerem, ponieważ płyn nasienny może wystarczyć się nawet na początku erekcji). Nie używaj prezerwatywy, jeśli czujesz, że ślizga się, kurczy lub wywiera nadmierny nacisk na penisa, ponieważ może to prowadzić do rozdarcia.
Wyrzuć obrożce i użyj prezerwatywy. Prezerwatywa dopasuje się do penisa. Upewnij się, że prezerwatywa pozostaje na swoim miejscu podczas stosunku. Jeśli prezerwatywa zsunie się, otwórz nową i zakończ ją przed kontynuowaniem stosunku. Jeśli tak się stanie, zasięgnij

porady lekarza.
Po wytrysku należy zachować ostrożność i przytrzymać prezerwatywę przy podstawie penisa podczas jego wyciągania.
Poczekaj, aż całkowicie wyciągniesz penisa przed usunięciem prezerwatywy.
Po użyciu prezerwatywę należy wyrzucić w higieniczny sposób do odpadów ogólnych.

Ważne informacje
Jeśli prezerwatywa lub opakowanie ma widoczne oznaki uszkodzenia, nie używaj jej. Wyrzuć uszkodzoną prezerwatywę i użyj nowej z nieuszkodzonego opakowania.
Te prezerwatywy nie są elastyczne! Nie napinaj ich, nie nadmuchuj ani nie rozciągaj.
Niektóre leki mogą uszkodzić prezerwatywę. Zapytaj swojego lekarza o kompatybilność leków z prezerwatywami. Prezerwatywy nigdy nie należy używać po raz drugi.
Jeśli nie masz pewności, że prezerwatywa została użyta prawidłowo, natychmiast skontaktuj się z lekarzem i uzyskaj poradę tak szybko, jak to możliwe. Najlepiej w ciągu 24 godzin, ale nie później niż po 72 godzinach.

DA - DANISH

Anvendelse
Kontroller, at kondomemballagen er intakt, og at den ikke har overskredet udløbsdatoen. Åbn forsigtigt pakken og fjern kondomet. Pas på ikke at beskadige det med dine negle eller smykker. Tag kondomet ud umiddelbart før brug.
Træk kondomet over en oprejst og tør penis og træk ringen op mod maven (gør dette før kontakt med partneren, da sædvaske kan komme ud selv i begyndelsen af en erektion). Brug ikke kondomet, hvis du føler, at det glider, trækker sig sammen eller presser for meget på penis, fordi dette kan føre til det bliver revet.
Kassér ringen og brug kondomet. Kondomet vil tilpasse sig penis. Sørg for, at kondomet forbliver på plads under sex. Hvis kondomet kommer af, skal du åbne et nyt og tage det på, før du fortsætter med sex. Hvis det sker, skal du søge lægehjælp.
Efter ejakulation skal du være forsigtig med at holde kondomet på bunden af penis, mens du trækker penis ud. Vent, indtil penis er helt trukket ud, før du fjerner kondomet.
Bortskaf kondomet på en hygiejnisk måde i almindeligt affald efter brug.

Vigtig information
Hvis kondomet eller emballagen har synlige tegn på skade, må du ikke bruge det. Kassér det beskadigede kondom, og tag et nyt fra en ubeskadiget pakke. Disse kondomer er ikke elastiske! Du må ikke forlænge, puste dem op eller strække dem.
Visse lægemidler kan beskadige kondomet. Spørg din læge om din medicin og kondomerne er kompatible. Et kondom bør aldrig bruges mere end én gang.
Hvis du ikke er sikker på, om du har brugt kondomet korrekt, skal du straks kontakte din læge og få råd så hurtigt som muligt. Helst inden for 24 timer, men senest inden for 72 timer.

Употреба
Проверете дали опаковката на презерватива е непољътната и дали сроќот на годност не е изтекъл. Отворете внимателно опаковката и извадете презерватива. Внимавайте да не го повредите с нокти или бижута. Извадете презерватива точно преди употреба.
Поставете презерватива върху сух, еректирал пенис и го плъзнете по лентите към корема (направете това преди контакт с партньора си, тъй като семенната течност може да изтече в началото на ерекцията). Не използвайте презерватива, ако смятате, че се изплъзне, ще притисне или може прекомерен натиск върху пениса, тъй като това може да причини увреждане. Изхвърлете лентите и използвайте презерватива. Презервативът ще се приспособи към пениса. Уверете се, че презервативът остава правилно поставен по време на полов акт. Ако презервативът се разхлаби, отворете нов и го поставете преди сексуални отношения. Ако това се случи, потърсете лекарска помощ. След еякулация не забравяйте да държите презерватива върху стволa на пениса, докато го отстранявате. Преди да извадите презерватива, изчакайте пениса да бъде изтеглен напълно. Изхвърлете презерватива по хигиеничен начин в общите отпадъци след употреба.

Важна информация
Не използвайте презерватив, ако опаковката показва видими дефекти. Изхвърлете повредения презерватив и използвайте нов от цяла опаковка. Тези презервативи не са еластични. Не удължавайте, не надувайте и не разтягайте.
Някои лекарства могат да повредят презерватива. Консултирайте се с Вашия лекар относно съвместимостта на употребата на презервативи и лекарства. Не можете да използвате повторно презерватив.
Ако не сте сигурни дали сте използвали правилно презерватива, незабавно посетете Вашия лекар и получите съвет възможно най-скоро. За предпочитане в рамките на 24 часа и максимум до 72 часа.

Важна информация
Не използвайте презерватив, ако опаковката показва видими дефекти. Изхвърлете повредения презерватив и използвайте нов от цяла опаковка. Тези презервативи не са еластични. Не удължавайте, не надувайте и не разтягайте.
Някои лекарства могат да повредят презерватива. Консултирайте се с Вашия лекар относно съвместимостта на употребата на презервативи и лекарства. Не можете да използвате повторно презерватив.
Ако не сте сигурни дали сте използвали правилно презерватива, незабавно посетете Вашия лекар и получите съвет възможно най-скоро. За предпочитане в рамките на 24 часа и максимум до 72 часа.

ET - ESTONIAN

Kasutamine
Kontrollige, et kondoomi pakend oleks terve ja selle kehtivusaeg ei oleks möödas. Avage pakend ettevaatlikult ja eemaldage kondoom.
Olge ettevaatlik, et te ei kahjustaks seda oma küünete või ehetege. Võtke kondoom välja vahetult enne kasutamist.
Tõmmake kondoom üle erekteerunud ja kuiva peenise ning rullige kondoom rõngaste abil lahti kõhu suunas (tehke seda enne partneriga kontakti asumist, sest seemnevedelikku võib väljuda isegi erektisiooni alguses). Ärge kasutage kondoomi, kui tunnete, et see libiseb, pigistab või surub liigselt peenisele, sest see võib põhjustada selle rebenemise. Visake rõngad ära ja kasutage kondoomi. Kondoom kohandub peenisega. Veenduge, et kondoom

jääks seksi ajal paigale. Kui kondoom tuleb ära, avage uus kondoom ja pange see enne seksi jätkamist peale. Kui see peaks juhtuma, pöörduge konsulteerimiseks arsti poole. Pärast ejakulatsiooni peate olema ettevaatlik, hoides kondoomi peenisevarre alumise osa juures paigal, kuni tõmbate peenise välja. Enne kondoomi eemaldamist oodake, kuni peenis on täielikult välja tõmmatud. Visake kondoom pärast kasutamist hügieeniliselt üldjätmete hulka.

Oluline informatsioon
Kui kondoomil või pakendil on nähtavaid kahjustusi, ärge seda kasutage. Visake kahjustatud kondoom minema ja võtke kahjustamata pakendist kasutusele uus. Need kondoomid ei ole elastsed! Ärge pikendage, paisutage ega venitage neid.

Teatud ravimid võivad kondoomi kahjustada. Küsige oma arstilt ravimite ja kondoomide kokkusobivuse kohta.

Kondoomi ei tohi kunagi taaskasutada. Kui te ei ole kindel, kas olete kondoomi õigesti kasutanud, võtke kohe ühendust oma arstiga ja küsige nõu esimesel võimalusel. Soovitavalt 24 tunni jooksul, kuid mitte hiljem kui 72 tunni jooksul.

Χρήση
«Βεβαιωθείτε ότι το περιτύλιγμα του προφυλακτικού είναι άδικοτο και η ημερομηνία λήξης δεν έχει λήξει. Ανοίξτε το περιτύλιγμα προσεκτικά και βγάλτε το προφυλακτικό.Προσέξτε να μην το καταστρέψετε με τα νύχια ή τα κοσμήματά σας. Βγάλτε το προφυλακτικό λίγο πριν το χρησιμοποιήσετε». Προσέξτε να μην το καταστρέψετε με τα νύχια ή τα κοσμήματά σας. Βγάλτε το προφυλακτικό λίγο πριν το χρησιμοποιήσετε».

Τοποθετήστε το προφυλακτικό πάνω σε ένα στεγνό, όρθιο πέος και σιγά-σιγά το προς τα κάτω προς την κοιλιά (κάντε το πριν την επαφή με τον σύντροφό σας καθώς το σπέρματικό υγρό μπορεί να διαρρέει στην αρχή μιας σύσσης). Μην χρησιμοποιείτε το προφυλακτικό εάν νομίζετε ότι θα γλιστρήσει, θα σπλιστεί ή θα σκιστεί υπερβολική πίεση στο πέος, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη. Πετάξτε τις ταινίες και χρησιμοποιήστε το προφυλακτικό. Το προφυλακτικό θα προσαρμώσει στο πέος. Βεβαιωθείτε ότι το προφυλακτικό παραμένει σωστά κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής επαφής. Εάν το προφυλακτικό χαλαρώσει, ανοίξτε ένα καινούριο και φορέστε το πριν κάνετε σεξ. Εάν συμβεί αυτό, ζητήστε ιατρική συμβουλή. Μετά την εκσπερμάτση, φροντίστε να κρατάτε το προφυλακτικό στον άξονα του πέους ενώ το αφαιρείτε. Πριν αφαιρέσετε το προφυλακτικό, περιμένετε μέχρι να αποσυρθεί πλήρως το πέος. Απορρίψτε το προφυλακτικό με υγιινό τρόπο στα γενικά απορρίμματα μετά τη χρήση.

Απορρίψτε το προφυλακτικό με υγιινό τρόπο στα γενικά απορρίμματα μετά τη χρήση.
Απορρίψτε το προφυλακτικό με υγιινό τρόπο στα γενικά απορρίμματα μετά τη χρήση.
Απορρίψτε το προφυλακτικό με υγιινό τρόπο στα γενικά απορρίμματα μετά τη χρήση.

Σημαντικές πληροφορίες
Μη χρησιμοποιείτε το προφυλακτικό εάν η συσκευασία παρουσιάζει ορατά ελαττώματα. Πετάξτε το καταστραμμένο προφυλακτικό και χρησιμοποιήστε ένα νέο από άθικτη συσκευασία. Αυτά τα προφυλακτικά δεν είναι ελαστικά.

Μην επιμηνόκονετε, μην φυσούκονετε ή τεντώνετε.
Ορισμένα φάρμακα μπορεί να βλάψουν το προφυλακτικό. Συμβουλευτείτε το γιατρό σας σχετικά με τη συμβατότητα της χρήσης προφυλακτικών και φαρμάκων.
Δεν μπορείτε να ξαναχρησιμοποιήβτε το ίδιο προφυλακτικό.
«Εάν δεν έλστε σίγουροι αν έχετε χρησιμοποιήσει σωστά το προφυλακτικό, επικοινωνήβτε με το γιατρό σας και λάβετε συμβουλές το συντομότερο δυνατό. Κατά προτίβηση εντός 24 ωρών και μέγιστη περίοδος 72 ωρών.

HU - HUNGARIAN

Alkalmazás
Ellenőrizze, hogy az óvszer csomagolása sértetlen-e, és hogy nem járt le. Óvatosan nyissa ki a csomagolást, és vegye ki az óvszert. Vigyázzon, hogy körmével vagy ékszereivel ne sértsen meg. Vegye ki az óvszert közvetlenül használat előtt. Húzza az óvszert az erekciós és száraz péniszre, és húzza a gumit hasa felé (ezt a partnerrel való érintkezés előtt tegye meg, mivel az ondó már az erekció kezdetén is kiszároghat). Ne használja az óvszert, ha úgy érzi, hogy csúszik, feszül vagy túlzottan nyomja a péniszét, mivel ez az óvszer elszakadhat. Dobja ki a csomagolást, és használja az óvszert. Az óvszer a péniszhez simul. Győződjön meg róla, hogy az óvszer megfelelően a helyén marad szex közben. Ha az óvszer elszakad, nyisson ki egy új óvszert, és tegye fel, mielőtt folytatná a szexet. Ha ez történik, forduljanak orvoshoz. Az ejakuláció után mindenképpen tartsa az óvszert a pénisz tövénél, miközben kihúzza a péniszet. Az óvszer eltávolítása előtt várjon, amíg a pénisz teljesen ki nem jön. Használat után az óvszert higiénikusan dobja ki az általános hulladékgyűjtőbe.

Fontos információk
Ha az óvszer vagy a csomagolás láthatóan sérült, ne használja. Dobja ki a sérült óvszert, és használjon újat egy sértetlen csomagolásból. Ezek az óvszerek nem rugalmasak! Kérjük, ne hosszabbítsa, ne fújja fel és ne nyújtsa ki őket. Bizonyos gyógyszerek károsíthatják az óvszert. Kérjük, kérdezze meg orvosát a gyógyszerek és az óvszerek kompatibilitásáról. Az óvszert soha nem szabad másodszor használni. Ha nem biztos benne, hogy helyesen használta-e az óvszert, azonnal forduljanak orvoshoz, hogy a lehető leghamarabb tanácsot kérjenek. Leghétleg 24 órán belül, de legkésőbb 72 órán belül.

LV - LATVIAN

Lietošana
Pārlicinieties, ka prezervatīva iepakojums ir neskarts un tam nav beidzies derīguma termiņš. Uzmanīgi atveriet iepakojumu un izņemiet prezervatīvu. Uzmanieties, lai nesabojātu to ar nagiem vai rotaslietām. Izņemiet prezervatīvu uzmanīgi, neļietošanos. Uzvelciet prezervatīvu pār erekciju sasniedzūšu un sausu locekli un velciet

malinas uz vēdera pusē (dariet to pirms kontakta ar partneri, jo sēklas šķidrums var noplūst pat erekcijas sākumā). Nelietojiet prezervatīvu, ja jūtāt, ka tas slīd, saraujas vai pārmērīgi nospiež locekli, jo tas var izraisīt tā saplīšanu. Atļaidiet prezervatīvu un variet sākt tā izmantošanu. Prezervatīvs pielāgosies loceklim. Pārlicinieties, ka prezervatīvs sekss laikā paliek savā vietā. Ja prezervatīvs noslīdz, pamēniet jaunu! Prezervatīvu un uzvelciet, lai turpinātu seksu. Ja tā notiek, meklējiet ārstu palīdzību. Pēc ejakulācijas, rūpīgi turiet prezervatīvu aiz tā pamatnes un izņemiet locekli. Uzgaidiet, līdz loceklis ir pilnībā izņemts un tad atbrīvojieties no prezervatīva. Pēc lietošanas higiēniski utilizējiet prezervatīvu atkritumos.

Svarīga informācija
Ja prezervatīvam vai iepakojumam ir manāmas bojājuma pēdas, neizmantojiet to. Atbrīvojieties no bojātā prezervatīva un izmantojiet jaunu n nebojātā iepakojuma.
Šie prezervatīvi nav elastīgi! Lūdzu, nepagariniet tos, nepūtiot n nestiepiet. Konkrētas medicīniskās vielas var sabojāt prezervatīvu. Lūdzu, sazinieties ar ārstu, lai noskaidrotu prezervatīva saderību ar medicīniskajām vielām. Prezervatīvu nedrīkst izmantot atkārtoti. Ja neesat pārlicināts, vai esat izmantojis prezervatīvu pareizi, nekavējoties sazinieties ar ārstu un konsultējieties cik ātri vien iespējams. Ieteicams 24 stundu laikā, bet ne vēlāk kā 72 stundu laikā.

LT - LITHUANIAN

Naudojimas
Patikrinkite, ar prezervatyvo pakuotė nepažeista ir ar nepasibaigęs galiojimo laikas. Atsargiai atidarykite pakuotę ir išimkite prezervatyvą. Būkite atsargūs, kad nepažeistumėte jo nagais ar papuošalais. Išimkite prezervatyvą prieš pat naudojimą.
Uždėkite prezervatyvą ant erekcijos penio, o lankus traukite link pilvo (tai darykite prieš kontaktuodami su partneriu, nes sėklų skystis gali išsiskirti net erekcijos pradžioje). Nenaudokite prezervatyvo, jei jaučiate, kad jis slįsta, susitraukia ar per daug spaudžia varpą, nes tai gali sukelti plyšimą. Išmeskite lankus ir naudokite prezervatyvą. Prezervatyvas prisitaikys prie varpos. Įsitinkinkite, kad seksu metu prezervatyvas išliks savo pozicijoje.
Jei prezervatyvas nusiima, atidarykite naują prezervatyvą ir užsidėkite jį prieš tęsdami seksą. Jei taip atsitiktų, kreipkitės medicininės pagalbos. Po ejakuliacijos turite būti atsargūs ir laikykite prezervatyvą ant varpos pagrindo, kol traukiate varpą. Prieš išimdami prezervatyvą palaukite, kol varpa bus visiškai ištraukta.
Higieniškai išmeskite prezervatyvą į bendrąsias atliekas.

Svarbi informacija
Jei prezervatyvas ar pakuotė turi matomų pažeidimų požymių, jo nenaudokite. Išmeskite pažeistą prezervatyvą ir naudokite naują iš nepažeistos pakuotės.
Šie prezervatyvai nėra elastingi! Prašome jų nepręsti, neišpūsti ir netempti.

Tam tikri vaistai gali sugadinti prezervatyvą. Paklauskite savo gydytojo apie vaistų ir prezervatyvų suderinamumą.
Prezervatyvo niekada negalima naudoti antrą kartą.
Jei nesate tikri, ar prezervatyvą naudojote teisingai, nedelsdami kreipkitės į gydytoją ir kuo greičiau kreipkitės patarimo. Geriausia per 24 valandas, bet ne vėliau kaip per 72 valandas.

SK - SLOVAK

Použitie
Skontrolujte, či je obal neporušený a či ešte neuplynul dátum spotreby. Opatrne otvorte obal – dbajte, aby ste ho nepoškodili nechtami alebo šperkami. Vyberte kondóm tesne pred použitím.
Nasajte kondóm na stoporený a suchý penis a zatiahnite za šnúrky smerom k bruchu (ešte pred kontaktom s partnerkou – spermie môžu vytekať už na začiatku erekcie). Nepoužívajte kondóm, ak cítite, že kľže, stahuje alebo

neprimerane tlačí na penis – kondóm sa môže roztrhnúť.
Odstráňte šnúrky a použite kondóm. Prispôbobi sa penisu. Dbajte, aby kondóm počas sexu zostal v správnej polohe. Pri uvoľnení otvorte nový kondóm a nasadte si ho, kým budete pokračovať v sexe. Potom vyhladajte lekársku pomoc.
Po ejakulácii starostlivo pridržiujte kondóm pri koreni penisu. Odstráňte ho až po úplnom vytiahnutí penisu. Po použití kondóm hygienicky vyhodte do bežného odpadu.
Dôležité informácie
Ak obal alebo kondóm javí viditeľné známky poškodenia, nepoužívajte ho. Poškodený kondóm zlikvidujte a použite nový z neporušeného obalu. Kondómy nepredlžujte, nenafukujte ani neroztahujte – nie sú elastické!
Niektoré lieky môžu kondóm poškodiť. Spýtajte sa svojho lekára na kompatibilitu liekov s kondómami. Kondóm nikdy nepoužívajte druhýkrát. Ak si nie ste istý, či ste kondóm použili správne, okamžite kontaktujte svojho lekára a nechajte si čo najskôr poradiť. Najlepšie do 24 hodín, nie neskôr ako do 72 hodín.


NO - NORWEGIAN


applikasjon
Sjekk at kondomemballasjen er intakt og at den ikke har passert utløpsdatoen. Åpne pakken forsiktig og fjern kondomet. Vær forsiktig så du ikke skader den med negler eller smykker.

Ta ut kondomet rett før bruk. Trekk kondomet over en oppreist og tørr penis og trekk bøyelene mot magen (gjør dette før kontakt med partneren, da sædveske kan komme ut selv i begynnelsen av en ereksjon). Ikke bruk kondomet hvis du føler at det sklir, trekker seg sammen eller trykker for mye på penis, fordi dette kan føre til riving. Kast bøyelene og bruk kondomet. Kondomet vil tilpasse seg penis. Sørg for at kondomet holder seg på plass under sex. Hvis kondomet løsner, åpne et nytt kondom og ta det på

før du fortsetter med sex. Hvis dette skjer, søk lege. Etter utløsning må du være forsiktig med å holde kondomet på bunnen av penis mens du trekker penis ut. Vent til penis er helt trukket ut før du fjerner kondomet. Kast kondomet hygienisk i vanlig avfall etter bruk.

Viktig informasjon
Hvis kondomet eller emballasjen har synlige tegn på skade, ikke bruk det. Kast det skadede kondomet og bruk et nytt fra en uskadet pakke. Disse kondomene er ikke elastiske! Ikke forleng, blås opp eller strekk dem. Visse medisiner kan skade kondomet. Spør legen din om kompatibiliteten til medisiner og kondomer. Kondom bør aldri brukes en gang til. Hvis du ikke er sikker på om du har brukt kondomet riktig, kontakt legen din umiddelbart og få råd så snart som mulig. Helst innen 24 timer, men ikke senere enn 72 timer.

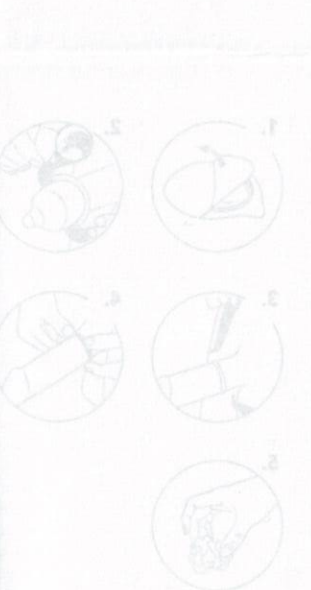

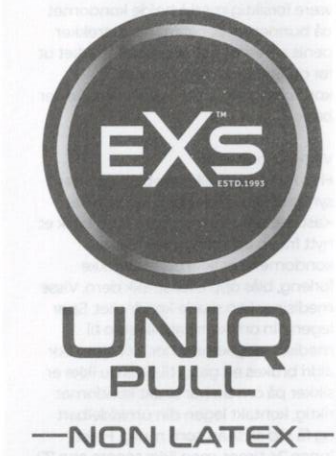

Made in Colombia by:
UNIQUE INTERNATIONAL
S.A.S, Cra 19A N° 196 - 23
Bogotá - Colombia

Authorized Representative in Europe:
EC REP MDI EUROPA GMBH
Langenhagener Str. 71
30855 Hannover-Langenhagen
Germany



DE - GERMAN

Anwendung
Prüfen Sie, ob die Kondom-verpackung intakt und das Verfalls-datum noch nicht überschritten ist. Öffnen Sie die Verpackung vorsichtig und entnehmen Sie das Kondom.
Achten Sie darauf, dass Sie es nicht mit den Fingernägeln oder Schmuck beschädigen. Entnehmen Sie das Kondom unmittelbar vor dem Gebrauch.
Ziehen Sie das Kondom über einen erigierten und trockenen Penis und ziehen Sie die Bänder zum Bauch hin (tun Sie dies vor dem Kontakt mit dem Partner, da Samenflüssigkeit schon am Anfang einer Erektion austreten kann). Benutzen Sie das Kondom nicht, wenn Sie das Gefühl haben, dass es rutscht, sich zusammenzieht oder übermäßig auf den Penis drückt, denn dies kann zum Reißen führen.
Entsorgen Sie die Bänder und verwenden Sie das Kondom. Das Kondom wird sich an den Penis anpassen. Achten Sie darauf, dass das Kondom beim Sex richtig platziert bleibt. Wenn das Kondom sich löst, öffnen Sie ein neues Kondom und ziehen Sie es über, bevor Sie mit dem Sex fortfahren. Falls das passiert, suchen Sie sich medizinischen Rat.
Nach der Ejakulation müssen Sie darauf achten das Kondom am Penisansatz festzuhalten während Sie den Penis herauszuziehen. Warten Sie, bis der Penis vollständig herausgezogen ist, bevor Sie das Kondom abziehen. Entsorgen Sie das Kondom nach dem Gebrauch hygienisch im allgemeinen Müll.

Wichtige Informationen
Wenn das Kondom oder die Verpackung sichtbare Anzeichen einer Beschädigung aufweist, ver-wenden Sie es nicht. Entsorgen Sie das beschädigte Kondom und verwenden Sie ein neues aus einer unbeschädigten Verpackung. Diese Kondome sind nicht elastisch! Bitte nicht verlängern, aufblasen oder dehnen. Gewisse Medikamente können das Kondom beschädigen. Bitte fragen Sie Ihren Arzt nach der Verträglichkeit von Medikamenten und der Kondome. Ein Kondom sollte niemals ein zweites Mal verwendet werden.
Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Sie das Kondom richtig verwendet haben, wenden Sie sich unmittelbar an Ihren Arzt und lassen sich so schnell wie möglich beraten. Vorzugsweise innerhalb von 24 Stunden, aber nicht später als 72 Stunden.

EN - ENGLISH

Application
Check that the condom packaging is intact and that it is not past its expiration date. Carefully open the package and remove the condom. Be careful not to damage it with your fingernails or jewellery. Take out the condom immediately before use.
Pull the condom over an erect and dry penis and pull the hoops towards the abdomen (do this before contact with the partner, as seminal fluid can come out even at the beginning of an erection). Do not use the condom if

you feel that it is slipping, contracting or pressing excessively on the penis, because this can lead to tearing.
Discard the hoops and use the condom. The condom will adapt to the penis. Make sure that the condom stays in position during sex. If the condom comes off, open a new condom and put it on before continuing with sex. If this happens, seek medical advice.
After ejaculation, you have to be careful to hold the condom on the base of the penis while you pull the penis out. Wait until the penis is completely pulled out before removing the condom.
Dispose of the condom hygienically in general waste after use.

Important information
If the condom or packaging has visible signs of damage, do not use it. Discard the damaged condom and use a new one from an undamaged package. These condoms are not elastic! Please do not extend, inflate or stretch them. Certain medications can damage the condom. Please ask your doctor about the compatibility of medications and condoms.
A condom should never be used a second time.
If you are not sure whether you have used the condom correctly, contact your doctor immediately and get advice as soon as possible. Preferably within 24 hours, but not later than 72 hours.

IT - ITALIAN

Applicazione
Verifica che la confezione del preservativo sia integra e che non sia ancora scaduta. Apri la confezione con attenzione e rimuovi il preservativo. Fai attenzione a non danneggiarlo con le unghie o gioielli. Tira fuori il preservativo immediatamente prima dell'uso.
Metti il preservativo su un pene eretto e asciutto e tira gli elastici verso lo stomaco (fallo prima del contatto con il tuo partner poiché lo sperma può fuoriuscire presto da un'erezione). Non usare il preservativo se lo senti scivolare, stringersi o esercitare una pressione eccessiva sul pene poiché ciò potrebbe causarne la lacerazione.
Elimina gli elastici e utilizza il preservativo. Il preservativo si adatterà al pene. Assicurati che il preservativo rimanga in posizione durante il sesso.
Se il preservativo si allenta, apri un nuovo preservativo e indossalo prima di procedere con il sesso. Se ciò accade, consulta un medico.
Dopo l'eiaculazione, devi fare attenzione a tenere il preservativo alla base del pene mentre estrai il pene. Attendere che il pene sia completamente estratto prima di rimuovere il preservativo. Dopo l'uso, smaltisci il preservativo in modo igienico nella spazzatura comune.

Informazioni importanti
Se il preservativo o la confezione mostrano segni visibili di danneggiamento, non utilizzarli. Elimina il preservativo danneggiato e utilizzane uno nuovo dalla confezione integra. Questi preservativi non sono elastici! Si prega di non allungare, gonfiare o distendere. Alcuni farmaci possono danneggiare

l'envoltorio. Si prega di chiedere al proprio medico la compatibilità di farmaci e preservativi.
Un preservativo non dovrebbe mai essere usato una seconda volta.
Se non sei sicuro di aver usato correttamente il preservativo, contatta immediatamente il tuo medico e fatti consigliare il prima possibile. Preferibilmente entro 24 ore ma non oltre 72 ore.

FR - FRENCH

Application
Vérifiez que l'emballage du préservatif est intact et que la date de péremption n'est pas dépassée. Ouvrez l'emballage avec précaution et retirez le préservatif. Assurez-vous de ne pas l'endommager avec vos ongles ou vos bijoux. Sortez le préservatif de son emballage immédiatement avant utilisation.
Placez le préservatif sur un pénis en érection et sec et tirez les cordons vers votre abdomen (faites-le avant tout contact avec votre partenaire, car du sperme peut s'écouler au début d'une érection). N'utilisez pas le préservatif si vous sentez qu'il glisse, se contracte ou exerce une pression excessive sur le pénis, car cela peut provoquer une déchirure.
Jetez les cordons et utilisez le préservatif. Le préservatif s'adaptera en fonction du pénis. Assurez-vous que le préservatif reste correctement en place pendant les rapports sexuels. Si le préservatif se détache, ouvrez un nouveau préservatif et mettez-le avant de continuer à avoir des relations sexuelles. Si cela se produit, consultez un médecin.
Après l'éjaculation, vous devez vous assurer de maintenir le préservatif à la base du pénis pendant que vous sortez le pénis. Attendez que le pénis soit complètement sorti avant de retirer le préservatif.
Après utilisation, jetez le préservatif de manière hygiénique dans les ordures ménagères.

Informations importantes
Si le préservatif ou l'emballage présente des signes visibles de dommage, ne l'utilisez pas. Jetez le préservatif endommagé et utilisez-en un neuf issu d'un emballage intact.
Ces préservatifs ne sont pas élastiques! Ne pas allonger, gonfler ou étirer. Certains médicaments peuvent endommager le préservatif. Veuillez consulter votre médecin au sujet de la compatibilité de ces médicaments et des préservatifs.
Un préservatif ne doit jamais être utilisé une deuxième fois.
„Si vous n'êtes pas sûr d'avoir utilisé le préservatif correctement, contactez immédiatement votre médecin et demandez conseil auprès de celui-ci dès que possible. De préférence dans les 24 heures, mais pas plus tard que 72 heures.

ES - SPANISH

Uso
Compruebe que el envoltorio del preservativo esté intacto y la fecha de caducidad no haya vencido. Abra

el envoltorio con cuidado y saque el preservativo.
Tenga cuidado de no dañarlo con las uñas o joyas. Saque el preservativo justo antes de su uso.
Ajuste el preservativo sobre un pene erecto y seco y deslícelo por las bandas hacia la barriga (haga esto antes de tener contacto con su pareja, ya que el líquido seminal puede escapar al comienzo de una erección). No utilice el preservativo si cree que resbala, se contrae o presiona excesivamente el pene, porque podría causar daños. Deseche las bandas y utilice el preservativo. El preservativo se adaptará al pene. Asegúrese de que el preservativo permanece bien colocado durante la relación sexual. Si el preservativo se afloja, abra uno nuevo y póngaselo antes de mantener relaciones sexuales. En caso de que esto ocurra, busque asesoramiento médico.
Después de la eyaculación, asegúrese de sujetar el preservativo en la prolongación del pene mientras lo retira. Antes de sacar el preservativo, espere a que el pene se haya extraído completamente.
Deseche el preservativo de un modo higiénico en los residuos generales después de su uso.

Información importante
No utilice el preservativo si el envoltorio muestra defectos visibles. Deseche el preservativo dañado y utilice uno nuevo de un envoltorio intacto.
Estos preservativos no son elásticos. No alargar, inflar o estirar. Algunos medicamentos pueden dañar el preservativo. Consulte a su médico sobre la compatibilidad del uso del preservativo y medicamentos.
No se puede reutilizar un preservativo. Si no está seguro de si ha utilizado el preservativo correctamente, consulte a su médico de inmediato y asesórese lo antes posible.
Preferentemente dentro de las 24 horas y un plazo máximo de 72 horas.

PT - PORTUGUESE

Aplicação
Certifique-se de que a embalagem do preservativo está intacta e de que a data de validade ainda não expirou. Abra cuidadosamente a embalagem e retire o preservativo.
Tenha cuidado para não o danificar com as suas unhas ou jóias. Remova o preservativo da embalagem imediatamente antes de este ser utilizado.
Coloque o preservativo sobre o pénis ereto e seco e puxe as fitas em direção ao abdómen (faça-o antes do contacto com o seu parceiro, uma vez que poderá haver a libertação de algum esperma logo no início da ereção). Não utilize o preservativo se este escorregar ou apertar excessivamente o pénis, a fim de evitar que o material se rasgue. Descarte as fitas e utilize o preservativo. O preservativo irá moldar-se ao pénis. Certifique-se de que o preservativo se mantém devidamente no lugar durante as relações sexuais. Se o preservativo sair, abra um novo preservativo e aplique-o antes de prosseguir com as relações sexuais. Neste caso, considere procurar aconselhamento médico.

Após a ejaculação, lembre-se de segurar o preservativo na base do pénis enquanto o puxa para fora. Aguarde até o pénis ter sido totalmente removido antes de retirar o preservativo.
Após a sua utilização, descarte o preservativo de forma higiénica no lixo doméstico geral.

Informações importantes

Se o preservativo ou a embalagem apresentarem sinais visíveis de danos, não o utilize. Elimine o preservativo danificado e utilize um novo, abrindo um pacote não danificado.
Estes preservativos não são elásticos! Por favor, não os tente alargar, insuflar ou esticar.
Certos medicamentos podem danificar o preservativo. Por favor, consulte o seu médico relativamente a possíveis interações de determinados medicamentos com os preservativos. Um preservativo nunca deve ser usado uma segunda vez.
Se não tiver a certeza de ter utilizado corretamente o preservativo, consulte de imediato o seu médico e procure aconselhamento o mais rapidamente possível. Faça-o de preferência dentro de 24 horas e nunca deixe exceder um período de 72 horas.

NL - DUTCH

Gebruiksaanwijzing
Controleer of de verpakking van het condoom niet beschadigd is en of de vervaldatum nog niet is verstreken.
Open de verpakking voorzichtig en haal het condoom eruit.
Pas op dat je het niet beschadigt met je vingernagels of sieraden. Het condoom eruit halen onmiddellijk voor gebruik.
Trek het condoom over een stijve en droge penis en trek de bandjes richting de buik (doe dit vóór het contact met uw partner, want ook bij het begin van een erectie kan er sperma ontsnappen). Gebruik het condoom niet als u voelt dat het afglijdt, strakker wordt of te veel druk uitoefent op de penis, want dan kan het condoom scheuren.
Verwijder de bandjes en gebruik het condoom. Zorg ervoor dat het condoom goed blijft zitten tijdens de seks.
Als het condoom loslaat, open dan een nieuw condoom en doe het om voordat u verder gaat met de seks.
Raadpleeg in dat geval een arts.
Na de ejaculatie moet u het condoom aan de basis van de penis vasthouden terwijl u de penis eruit terugtrekt. Wacht met het verwijderen van het condoom tot de penis er helemaal uit is.
Gooi het condoom na gebruik weg bij het huisvuil.

Belangrijke informatie
Als het condoom of de verpakking zichtbare tekenen van beschadiging vertoont, gebruik het dan niet. Gooi het beschadigde condoom weg en gebruik een nieuw condoom uit een onbeschadigde verpakking.
Deze condooms zijn niet elastisch! Gelieve ze niet op te blazen of uit te rekken.
Bepaalde medicijnen kunnen het condoom beschadigen. Vraag uw arts naar de compatibiliteit van medicijnen en condooms.
Een condoom mag nooit een tweede keer gebruikt worden.

Als het niet zeker weet of u het condoom correct hebt gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts voor advies. Bij voorkeur binnen 24 uur, maar niet later dan 72 uur.

CS - CZECH

Použití
Zkontrolujte, zda je obal neporušený a zda ještě neuplynulo datum spotřeby. Opatrně otevřete obal – dbejte, abyste jej nepoškodili nehty nebo šperky. Vyměňte kondom bezprostředně před použitím.
Nasadte kondom na ztopořený a suchý penis a zatáhněte za šňůrky směrem k bříchu (ještě před kontaktem s partnerkou – sperma může vytékat již na počátku erekce). Nepoužívejte kondom, pokud cítíte, že klouže, stahuje nebo nepřiměřeně tlačí na penis – může dojít k roztržení.
Odstraňte šňůrky a použijte kondom. Prizpůsobí se penisu. Dbejte, aby kondom během sexu zůstal ve správné poloze. Při uvolnění otevřete nový kondom a nasadte si jej, než budete pokračovat v sexu. Poté vyhledejte lékařskou pomoc.
Po ejakulaci pečlivě přidržte kondom u kořene penisu. Odstraňte jej teprve po úplném vytáhení penisu.
Po použití kondom hygienicky vyhodte do běžného odpadu.

Důležité informace
Pokud obal nebo kondom jeví viditelné známky poškození, nepoužívejte jej. Poškozený kondom zlikvidujte a použijte nový z nepoškozeného obalu.
Kondomy neprodlužujte, nenafukujte ani neroztahujte – nejsou elastické! Některé léky mohou kondom poškodit. Zeptejte se svého lékaře na kompatibilitu léků s kondomy.
Kondom nikdy nepoužívejte podruhé. Pokud si nejste jistý, zda jste kondom použil správně, okamžitě kontaktujte svého lékaře a nechte si co nejdříve poradit. Nejlépe do 24 hodin, ne později než do 72 hodin.

HR - CROATIAN

Primjena
Provjerite je li pakiranje kondoma netaknuto i nije li mu istekao rok trajanja. Pažljivo otvorite paket i uklonite kondom. Pazite da ga ne oštetite noktima ili nakitom. Izvadite kondom neposredno prije upotrebe.
Navucite kondom preko erektilnog i suhog penisa i povucite obruče prema trbuhu (učinite to prije kontakta s partnerom jer sjemena tekućina može izaći i na početku erekcije). Nemojte koristiti kondom ako osjećate da klizi, steže se ili pretjerano pritiska penis jer to može dovesti do pucanja.
Bacite obruče i upotrijebite kondom. Kondom će se prilagoditi penisu. Pazite da kondom tijekom seksa ostane na mjestu. Ako se kondom skine, otvorite novi kondom i stavite ga prije nastavka seksa. Ako se to dogodi, potražite savjet liječnika.
Nakon ejakulacije morate paziti da držite kondom na dnu penisa dok izvlačite penis. Prije skidanja kondoma pričekajte da se penis potpuno izvuče van.
Kondom nakon uporabe higijenski

odložiti u opći otpad.

Važna informacija
Ako kondom ili pakiranje ima vidljive znakove oštećenja, nemojte ga koristiti. Bacite oštećeni kondom i upotrijebite novi iz neoštećenog pakiranja.
Ovi kondomi nisu elastični! Nemojte ih produljivati, napuhivati ili istežati.
Određeni lijekovi mogu oštetiti kondom. Pitajte svog liječnika o kompatibilnosti lijekova i kondoma.
Kondom se nikada ne smije nanovo upotrijebiti.
Ako niste sigurni jeste li pravilno koristili kondom, odmah se obratite svom liječniku i potražite savjet što je prije moguće. Po mogućnosti unutar 24 ali ne kasnije od 72 sata.

SV - SWEDISH

Användning
Kontrollera att kondomförpackningen är intakt och att den inte har passerat utgångsdatumet. Öppna försiktigt förpackningen och ta bort kondomen. Var försiktig så att du inte skadar den med naglarna eller smycken.
Ta ut kondomen omedelbart före användning.
Dra kondomen över en erigerad och torr penis och dra bågarna mot buken (gör detta före kontakt med partnern, eftersom sädesvätska kan komma ut även i början av en erektion). Använd inte kondomen om du känner att den glider, drar ihop sig eller trycker överdrivet på penis, eftersom det kan leda till att den går sönder.
Kasta bågarna och använd kondomen. Kondomen kommer att anpassa sig till penisen. Se till att kondomen håller sig på plats under sex. Om kondomen lossnar, öppna en ny kondom och sätt på den innan du fortsätter med sex. Om detta händer, sök läkare.
Efter utlösning måste du vara noga med att hålla kondomen på basen av penis medan du drar ut penis. Vänta tills penis är helt utdragen innan du tar bort kondomen.
Kassera kondomen på ett hygieniskt sätt i det vanliga avfallet efter användning.

Viktig information
Om kondomen eller förpackningen har synliga tecken på skada, använd den inte. Kassera den skadade kondomen och använd en ny från en oskadad förpackning.
Dessa kondomer är inte elastiska! Vänligen sträck inte ut, blås inte upp eller sträck ut dem.
Vissa mediciner kan skada kondomen. Fråga din läkare om kompatibilitet mellan mediciner och kondomer.
En kondom ska aldrig användas en andra gång.
Om du inte är säker på om du har använt kondomen på rätt sätt, kontakta din läkare omedelbart och få råd så snart som möjligt.
Helst inom 24 timmar, men inte senare än 72 timmar.
Sparvög, svensk är hälsan ytterst viktig.
Efter sex ska kondom alltid tas bort och kasseras på ett hygieniskt sätt i det vanliga avfallet.