

Use of Condom

Flip the tip of the capsule and carefully tear away the protection foil. The condom is already placed with the reservoir pointing upwards in the hygienic and safe capsule packaging. To protect from sexually transmitted diseases and unwanted pregnancy, the condom must be worn before any contact of penis and body openings. Hold the condom with thumb and forefinger on top of the reservoir, so that no air is inside and roll the condom completely over the erect penis. Be careful not to damage the condom with sharp objects such as jewellery, fingernails or teeth. After ejaculation, press and hold the condom at the base and withdraw still erect penis. Use each condom only once.
Warning: condom can slip, if penis is not erect

Use of Lubricants






When using additional lubricants, do not to use oil-based lubricants such as Vaseline, baby oil, body lotion, massage oil, butter, margarine etc., as these may damage the condom. Use only lubricants which are specifically recommended for use with condoms.

Storage

Store cool and dry. Avoid direct sunlight. Do not use condoms after expire date or if packaging is damaged.

Important:

When used correctly, these condoms can offer secure protection. No condom can offer 100% protection from sexually transmitted diseases and unwanted pregnancy. These condoms should not to be used by people with latex allergy. Medication, which is used in genital areas (e.g. ointments or creams) may harm the effectiveness of the condom. Please contact your doctor or pharmacist. Dispose used condoms hygienically, not in the toilette.
Warning: regrowing stubbles, extensive hair or genital piercings may damage the condom.

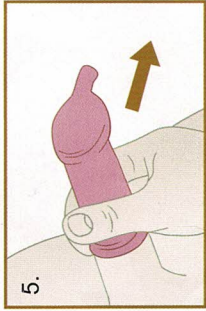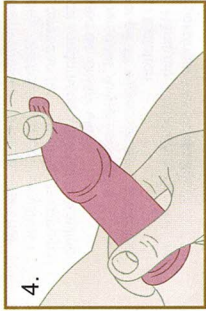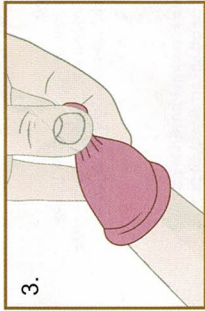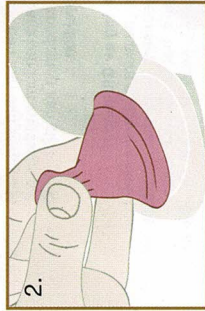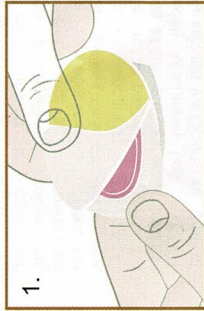

Width: 52 ± 2 mm Length: ≥ 180 mm

Goldcaps AG
Seestrasse 345
8810 Horgen / Zurich
Switzerland



Authorized representative:
Shanghai International Holding
Corp. GmbH (Europe)
Address: Effestrasse 80,
20537 Hamburg, Germany



Manufacturer:
Ftione Latex Products Co., Ltd. Guangdong
Addr: No.5 Tongji Road, Lingbei Industrial Zone,
Suixi, 524338 Zhanjiang, Guangdong, China
Tel: (86) 759 7905898 Fax: (86) 759 7905869
Email: export@ftionelatex.com

Anwendung des Kondoms

Falten sie die Spitze der Kapsel und ziehen sie die Schutzrolle vorsichtig ab. Das Präservativ liegt bereits mit dem Reservoir nach oben in der hygienischen und sicheren Kapselverpackung. Damit das Präservativ vor sexuell übertragbaren Krankheiten und unerwünschter Schwangerschaft schützen kann, bitte vor dem ersten Kontakt zwischen Penis und Körperöffnung anwenden. Greifen sie dazu das Präservativ mit Daumen und Zeigefinger an der Spitze des Reservoirs, sodass kein Luftpolster entsteht und rollen sie es über den steifen Penis vollständig ab. Achten sie darauf, das Präservativ nicht mit scharfkantigen Gegenständen wie Schmuck, Fingerringen oder Zähnen zu beschädigen. Nach dem Samenerguss das Präservativ am Penisansatz festhalten und den noch steifen Penis langsam aus der Körperöffnung rausziehen. Jedes Präservativ nur einmal verwenden!
Vorsicht: Bei vorzeitiger Erschlaffung des Penis in der Körperöffnung kann das Präservativ abrutschen.

Verwendung von Gleitmitteln

Bei Anwendung mit zusätzlichen Gleitmitteln darauf achten, dass keine öl-und fetthaltigen Stoffe wie Vaseline, Babyöl, Body Lotion, Massageöl, Speiseöl, Butter, Margarine etc. verwendet werden, da diese das Präservativ beschädigen. Achten sie auf Gleitmittel, die ausdrücklich für den Gebrauch mit Präservativen empfohlen werden.

Aufbewahrung

Kühl und trocken aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Bitte keine Präservative mehr verwenden, deren Ablaufdatum bereits überschritten oder falls die Verpackung beschädigt ist.

Wichtige Hinweise

Bei richtiger Anwendung sind diese Präservative ein zuverlässiger Schutz. Kein Präservativ kann allerdings einen 100%igen Schutz vor sexuell übertragbaren Krankheiten und unerwünschter Schwangerschaft bieten. Dieses Präservativ ist für Latexallergiker ungeeignet. Einige Medikamente zur ausserlichen Anwendung von Penis und Körperöffnungen (z.B. Scheidenzäpfchen, Cremes) können die Wirksamkeit des Präservativs beeinträchtigen. Bitte kontaktieren sie ihren Arzt oder Apotheker. Gebrauchte Präservative bitte nicht in die Toilette, sondern immer in hygienisch in Haushaltspapier wickeln und in den Abfallimer werfen.
Achtung: Nachwachsende Haarstoppel, extensiver Haarnwuchs oder Piercings im Intimbereich können das Präservativ beschädigen.

Application du Préservatif

Plier la pointe de la capsule et tirer délicatement la feuille de protection. Le préservatif et son réservoir placé vers le haut sont dans une capsule hygiénique et sécurisée. Le préservatif vous protègeant des maladies sexuellement transmissibles et d'une grossesse non désirée, veuillez SVP utiliser le préservatif avant le premier contact entre le pénis et les orifices corporels. Tenir le préservatif au niveau du réservoir avec le pouce et l'index, presser légèrement le réservoir entre les doigts pour ne pas avoir d'air à l'intérieur du réservoir. Ne dérouler le préservatif que sur un pénis en érection. Afin d'éviter d'abimer le préservatif, faites attention à ce qu'il ne soit pas en contact avec des objets saillants tels que bijoux, ongles pointus, dents, piercings etc. Retirez avec précaution le pénis après l'éjaculation et avant le relâchement ce qui maintient le préservatif puis le tenir à la base du pénis pour éviter qu'il ne glisse et ne disperse son sperme dans les orifices corporels (vagin, anus).
Attention: en cas de relaxation du pénis, le préservatif peut glisser !

Utilisation du Lubrifiant

N'utiliser que des lubrifiants conseillés pour l'emploi de ces préservatifs. Ne jamais utiliser de lubrifiants à base d'huile ou de graisse. Les lubrifiants tels que vaseline, huile pour bébé, lotion pour le corps, huile de massage, huile ou crème solaire, beurre ou margarine, etc. peuvent attaquer le latex et provoquer des dommages au préservatif.

Règles de Conservation

Les préservatifs doivent être conservés au frais et au sec et à l'abri de la lumière directe du soleil. Ne pas utiliser les préservatifs après l'expiration de la date de péremption ou si l'emballage est endommagé.

Indications Importantes.

Utilisés correctement ces préservatifs sont une protection fiable. Aucun préservatif ne vous met 100 % à l'abri des maladies sexuellement transmissibles ou d'une grossesse non désirée. Ces préservatifs ne sont pas adaptés aux personnes allergiques au latex. Certains médicaments à usage externe du pénis ou des orifices corporels (ex. suppositoires, crèmes) peuvent affecter l'efficacité du préservatif. Veuillez contacter votre médecin ou votre pharmacien. Ne pas jeter les préservatifs usagés dans les toilettes. Afin d'éviter tout risque de contamination, emballer le préservatif usagé dans un papier avant de le jeter à la poubelle.
Attention : repousse des poils, piercings dans les parties intimes, etc. peuvent endommager les préservatifs.

Gebruik van het Preservatief
Scheur de verpakking open aan de scheurrand en trek voorzichtig de beschermende folie weg. Het preservatief ligt al met het reservoir naar boven in de hygiënische en beveiligde verpakking. Om je te kunnen beschermen tegen seksueel overdraagbare aandoeningen en ongewenste zwangerschappen, moet je het preservatief aanbrengen voor het eerste contact tussen de penis en lichaamsopeningen. Neem het preservatief aan de top van het reservoir vast tussen duim en wijsvinger, zodat er geen lucht in zit en rol het preservatief volledig af over de stijve penis. Let erop dat het preservatief niet beschadigd wordt door scherpe voorwerpen zoals juwelen, vingernagels of tanden. Na de zaadlozing het preservatief aan de penisbasis vasthouden en de nog stijve penis uit de opening trekken.
Elk preservatief slecht één maal gebruiken! Waarschuwing: bij vroegtijdige verslapping van de penis kan het preservatief wegglijden.

Gebruik van Glijmiddelen
Bij gebruik van extra glijmiddel erop letten geen middelen te gebruiken op basis van olie of vet zoals vaseline, baby olie, body lotion, massageolie, boter, margarine enz. , aangezien deze het preservatief kunnen beschadigen. Gebruik alleen glijmiddelen die uitdrukkelijk voor het gebruik met het preservatief worden aanbevolen.

Bewaring
Koel en droog bewaren. Direct zonlicht vermijden. Gebruik het preservatief niet meer na de vervaldatum of wanneer de verpakking beschadigd is.

Belangrijk

Bij een correct gebruik, bieden deze preservatiefs een veilige bescherming. Geen enkel preservatief kan echter volledig 100% bescherming bieden tegen seksueel overdraagbare aandoeningen en ongewenste zwangerschappen. Deze preservatiefs kunnen niet gebruikt worden door personen met een latexallergie. Medicatie die gebruikt wordt aan de geslachtsdelen (bv. zalf of crème) kunnen de werkzaamheid van het preservatief beïnvloeden. Raadpleeg hiervoor uw dokter of apotheker. Gebruikte preservatiefs niet in het toilet gooien, maar hygiënisch in een issue wikkelen en in de afvalcontainer weggooien.
Opgelet: Teruggroeiende haarlijes, overvloedige haargroei of piercings kunnen het preservatief beschadigen.

Utilizzo del preservativo

Piegare la punta della capsula e togliere il foglio di protezione con attenzione. Il preservativo ha già il serbatoio rivolto verso l'alto nell'involucro sicuro e igienico della capsula. Affinché il preservativo possa proteggere da malattie sessualmente trasmissibili e gravidanze indesiderate, utilizzarlo prima del primo contatto tra il pene e l'orifizio. Afferrare quindi il preservativo tra il pollice e l'indice all'estremità del serbatoio per farne uscire l'aria e strolarlo completamente sul pene eretto. Prestare attenzione che il preservativo non venga danneggiato con il contatto con anelli, gioielli o denti. Dopo l'eiaculazione tenere il preservativo alla base del pene ed estrarre il pene ancora eretto dall'orifizio. Utilizzare ogni preservativo una volta sola!

Attenzione: In caso di riassamento precoce del pene nell'orifizio il preservativo può scivolare via.

Utilizzo del lubrificante

Qualora si utilizzino ulteriori lubrificanti si prega di non utilizzare sostanze oleose o grasse come vaselina, olio per bambini, lozione per il corpo, olio per massaggi, olio commestibile, burro, margarina ecc., poiché questi danneggiano il preservativo. Si prega di utilizzare lubrificanti che vengono consigliati espressamente per l'utilizzo con preservativi.

Conservazione

Conservare in un luogo fresco e asciutto. Proteggere dalla luce solare diretta. Non utilizzare il preservativo qualora sia passata la data di scadenza o nel caso la confezione sia danneggiata.

Indicazioni importanti

Se utilizzati correttamente questi preservativi garantiscono una protezione affidabile. Tuttavia nessun preservativo può garantire una protezione al 100% contro malattie trasmissibili sessualmente e gravidanze indesiderate. Questi preservativi non sono adatti per chi è allergico al lattice. Alcuni farmaci per l'uso esterno per pene o orifizi (esempio ovuli, creme) possono influenzare l'efficacia del preservativo. Si prega di consultare il proprio medico o il farmacista. Non gettare preservativi usati nel wc, ma avvolgerli sempre nella carta e gettarli nella spazzatura.

Attenzione: la ricrescita di peli ispidi, una crescita vasta di peli o piercing nelle parti intime possono danneggiare il preservativo.

Utilización de Preservativo

Voltear la punta de la capsula y cuidadosamente desgarrar la lámina protectora. El preservativo ya está colocado con el depósito hacia arriba en el higiénico y seguro embalaje capsula. Para protegerse de las enfermedades de transmisión sexual y los embarazos no deseados, el preservativo se debe usar antes de cualquier contacto de pene y aberturas corporales. Sostenga el preservativo con el pulgar y el dedo índice en la parte superior del depósito, de modo que no haya aire en el interior y tirar el preservativo por completo sobre el pene erecto. Tenga cuidado de no dañar el preservativo con objetos punzantes como joyas, las uñas o los dientes. Después de la eyacuación , presione y mantenga presionado el preservativo en la base y retirar el pene todavía erecto. Use cada preservativo sólo una vez.

Advertencia: preservativo puede deslizarse, si el pene no está erecto

Uso de Lubrificantes

Cuando utilice lubricantes adicionales , no usar lubricantes a base de aceite como la vaselina, aceite para bebé , loción corporal , aceite para masaje , mantequilla , margarina , etc , ya que pueden dañar el preservativo. Utilice sólo los lubricantes que están recomendados específicamente para su uso con los preservativos.

Almacenamiento

Almacenar en lugar fresco y seco. Evite la luz solar directa. No utilizar los preservativos después de expirar la fecha o si el empaque está dañado.

Importante

Usándolos correctamente , estos preservativos pueden ofrecer una protección segura. Ningún preservativo puede ofrecer una protección del 100 % de las enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados. Estos preservativos no deben de ser utilizados por personas con alergia al látex. Medicamentos que se utilicen en las zonas genitales (por ejemplo, ungüentos o cremas) puede dañar la efectividad del preservativo. Favor de ponerse en contacto con su médico o farmacéutico. Descarte los preservativos usados de forma higiénica , no en el baño.

Advertencia : pelo rizado corto y grueso, pelo extenso o piercings genitales pueden dañar el preservativo.

Aplicação do preservativo

Dobre a ponta da capsula e retire a película de proteção com cuidado. O preservativo já se encontra, com o depósito virado para cima, na embalagem de capsula higiénica e segura. Para que o preservativo possa proteger contra doenças sexualmente transmissíveis e uma gravidez indesejada, deve ser aplicado, antes do primeiro contacto entre o penis e o orifício corporal. Segure no preservativo com o polegar e o indicador pela ponta do depósito, de forma a não surgirem acumulações de ar e desenrole-o, por completo, sobre o pénis erecto. Certifique-se de que não danifica o preservativo com objetos afiados como, joias, unhas dos dedos ou dentes. Depois da ejaculação, segure o preservativo na base do pénis e retire o pénis erecto lentamente do orifício corporal. Cada preservativo de ser utilizado apenas uma vez!

Cuidado: No caso de uma flacidez do pénis precoce dentro do orifício corporal, o preservativo pode escorregar.

Aplicação de lubrificantes

Durante a aplicação de lubrificantes adicionais certifique-se, que não sejam usadas substâncias oleosas ou com gordura como, a vaselina, óleos de bebé, loções corporais, óleos de massagem, óleos alimentares, manteiga, margarina etc., pois estes danificam o preservativo. Utilize lubrificantes, que são expressamente recomendados para a utilização com preservativos.

Conservação

Guardar num local fresco e seco. Proteger de incidência solar direta. Não utilize preservativos que se encontram fora da validade ou que possuam a embalagem danificada.

Notas importantes

Numa aplicação correta, estes preservativos são uma proteção fiável. No entanto, nenhum preservativo pode oferecer uma proteção a 100% de doenças sexualmente transmissíveis e uma gravidez indesejada. Este preservativo não é apropriado para pessoas com intolerância ao látex. Alguns medicamentos de aplicação exterior, no pénis ou nos orifícios corporais (p.ex. óvulos vaginais, cremes), podem interferir na eficácia do preservativo. Por favor consulte o seu médico ou farmacêutico. Não elimine os preservativos usados na sanita, enrole-os sempre em papel doméstico e elimine-os no lixo doméstico.

Atenção: Pelos em crescimento, crescimento de pelo excessivo ou piercings na zona íntima, podem danificar o preservativo.

Anvendelse af kondom

Emballagen åbnes i spidsen af kapselen og beskyttelsesfilien fjernes forsigtigt. Kondomet ligger allerede klar med reservoiret opaf i den hygieniske beskyttelsesforpakning. For at kondomet skal kunne beskytte imod seksuel overførte sygdomme og uønsket svangerskab, skal kondomet tages på fra før den første seksuelle kontakt med partneren. Klem luften ud af kondomets reservoir med tommel- og pegefingrer, og rul kondomet ud på den erigerede penis. Hånder kondomet forsigtigt, så at det ikke bliver beskadiget af negler, smykker eller tænder osv. Straks efter udløsningen trækker kondomet langsomt ud, mens man holder kondomet på plads, så sæden ikke løber ud. Kondomet må kun anvendes en gang!

OBS: Ved afslappet penis kan kondomet fortidigt glide af i kønsåbningen.

Brug af glidemiddel

Ved brug af ekstra glidecreme, må man ikke anvende glidemiddel der indeholder olie eller er oliebaseret som fx. vaseline, babyolie, body lotion, massageolie, spiseolie, smør, margarine el. lign. NB! Anvend kun glidecreme der er udtrykkeligt bliver anbefalet til brug sammen med kondomet.

Opbevaring

Opbevares tørt og køligt. Bør ikke udsættes for direkte sollys. Må kun anvendes en gang. Undgå brug af kondomet efter sidste forbrugsdato eller hvor forpakningen er beskadiget.

Vigtige retningslinjer

Ved korrekt anvendelse giver disse kondomer en sikker beskyttelse. Ingen svangerskabsforebyggende midler kan dog give en 100% beskyttelse imod seksuel overførte sygdomme eller uønskede svangerskaber. Dette præventionsmiddel er uegnet for latexallergiker. Visse medikamenter kan ved anbringelse på penis eller i kønsåbninger (fx. globuli vaginales eller cremer) påvirke kondomets beskyttelsesgrad. Spørg din læge eller apotek til råd. Kondomet må ikke skylles ud i toiletet, men bør altid smides ud med køkkenaffaldet hygienisk indviklet ind i køkkenpapir.

NB: Stubbehår, der er ved at vokse ud, meget kønshår eller piercings i underlivet kan beskadige kondomet.

Användning av Kondomen

Vrid försiktigt spetsen på behållaren och avlägsna skyddsfoliet. Kondomen är redan placerad med behållaren vänd uppåt i den hygieniska och säkra kapselförpackningen. För att skydda mot sexuellt överförbara sjukdomar och önskade graviditeter, bör kondomen påföras innan kontakt annan penis eller kroppsöppning. Håll kondomen med tummen och pekfingret vid toppen av behållaren, så att ingen luft finns innanför och rulla sedan kondomen helt över den erigerade penis. Var försiktig så att du inte skadar kondomen med något vasst föremål så som smycken, naglar eller fänder. Efter utlösning, tryck och håll kondomen vid basen och dra av den från den erigerade penis. Använd varje kondom endast en gång. Varning: kondomen kan glida av om penis inte har erektion.

Användning av Glidemedel

Vid behov av extra glidemedel skall inte något oljebaserat glidemedel användas, så som vaselin, baby olja, body lotion, massage olja, smör, margarin etc. Dessa kan skada kondomen. Använd endast glidemedel som är speciellt rekommenderade att användas i samband med kondomer.

Förvaring

Förvaras kallt och tørt. Undvik direkt solljus. Använd inte en kondom efter sista giltighetstid eller om förpackningen är skadad.

Viktigt

När dessa kondomer används på rätt sätt erbjuder de ett säkert skydd. Inga kondomer kan erbjuda 100% skydd mot sexuellt överförbara sjukdomar eller önskade graviditeter. Dessa kondomer skall inte användas av personer som har latex allergi. Medicinering, som används i genitala områden (tex. salvor eller krämer) kan skada kondomens effektivitet. Värnigen rådgör med din doktor eller apotekspersonal. Avyttra använda kondomer på ett hygieniskt sätt, spola inte ner dem i toaletten.

Varning: Hårstubb, omfattande hårväxt eller genitala percingar kan skada kondomen.

Kondomin Käyttö

Taita pakkauksen kärki, irrota suojafolio varovasti. Kapseli pakkauks on valmiiksi sekä hygieninen, kondomi on turvallisesti pakattu säiliö ylöspäin. Kondomi suojaa sukupuolitauteita sekä ei-toivotuilla raskauksilla, kondomia tulee käyttää jo ennen varsinaista yhdyntää.

Pidä kondomin kärjestä kiinni etusormella sekä peukalolla, purista mahdolliset ilmakuplat pois kondomin kärjestä, rullaa kondomi jäkistyneen peniksen päälle. Pidä huoli ettei terävät esineet, kuten kynnet, korut vahingoita kondonia. Älä avaa pakkauksa hampailta. Yhdyntmän jälkeen vedä penis ulos ennen kuin erkitto häviää kokonaan, pidä kondomista kiinni poisvedon aikana. Käytä kondomia vain kerran.

Varoitus – kondomi voi luiskahtaa pois, jos penis ei ole erektiossa

Luukasteiden Käyttö

Jos käytät luukasteita kondomin lisäksi, älä käytä öljy-pohjaisia luukasteita kuten vaseliinia, vartalovoiteita, vauvavoiliyä, voita, margariinia ym. sillä nämä voivat rikkoa kondomin. Käytä luukasteita joita suositellaan käytettäväksi kondomin kanssa.


Säilytys

Säilytä kondomi viileässä ja kuivassa paikassa. Vältä suoraa auringonvaloa. Älä käytä kondomia viimeisen käyttöpäivän jälkeen tai jos pakkaus on rikki.

Tärkeä

Oikein käytettäessä kondomi on hyvä ehkäisykeino. Kondomi ei kuitenkaan ole 100% suojaa seksitauteja tai ei-toivottua raskautta vastaan. Kondomi ei sovi kumiallergiasta kärsiville. Intimialueella saatava vaikuttaa kondomin tehoon. Oia yhteyttä lääkäriin tai apteekkarin. Hävitätä kondomi normaalin sekajätteen mukana, älä huuho WC:stä alas.

Varoitus: Hiussänki tai genitaalialueen lävistykset voivat rikkoa kondomin.

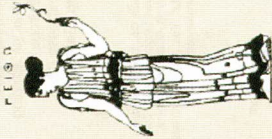

PEITHO

"Greek Goddess of Seduction"