


Gebrauchsanweisung für Kondome



Amor Gummiwaren GmbH
August-Rost-Str. 4,
99310 Arnstadt, Germany

www.amor.ag
info@amor.ag
www.amor-shop.de
www.vibratissimo.com
www.RimbacherLatex.de

CE 0197

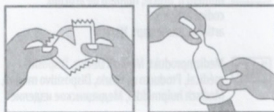

DE Wie man(n)'s macht ...

Die Kondomeinzelpackung (Folienbriefchen) auf Unversehrtheit prüfen. Ist diese offensichtlich beschädigt oder offen, das Kondom verwerfen und ein neues Kondom aus einer unbeschädigten Packung verwenden. Das Kondom schon vor dem ersten Kontakt zwischen dem Penis und dem Körper des Partners anlegen. Dazu das Kondom mit den Fingern vorsichtig aus der Folie befreien, um Beschädigungen durch Fingernägel, Schmuck usw. zu vermeiden. Das Reservoir (die Spitze des Kondoms) mit Daumen und Zeigefinger zusammendrücken, sodass es keine Luft mehr enthält. Die Vorhaut ganz zurückziehen, das Kondom mit dem Rollrand nach außen auf den erigierten Penis setzen und über den gesamten Penis abrollen. Es ist zu unterbrechen und eine Nachprüfung vorzunehmen, wenn man(n) spürt, dass das Kondom abrischt oder übermäßig auf dem Penis spannt, denn dies kann zu einem Riss im Kondom führen. Dazu den Penis zurückziehen. Das Kondom dabei am Penisansatz festhalten. Den Penis bald nach der Ejakulation, jedoch spätestens bevor er zu erschlaffen beginnt, auf die gleiche Weise herausziehen. Das Kondom nur einmal verwenden. Bei Wiederverwendung kann es ein erhöhtes Risiko für ein Versagen des Kondoms oder für eine Infektion geben. Gebrauchte Kondome im Hausmüll entsorgen und nicht in die Toilette werfen.

Was man(n) noch wissen muss ...

Diese Kondome bestehen aus Naturkautschuklatex, der bei Latexallergikern eventuell allergische Reaktionen einschließlich eines anaphylaktischen Schocks hervorrufen kann. Als zusätzliche Gleitmittel nur solche verwenden, die als kondomgeeignet ausgewiesen sind. Keine fetthaltigen Gleitmittel, wie Vaseline, Babyöl, Körperlotionen, Massageöle, Butter, Margarine usw. verwenden, da diese das Kondom schädigen. Nie zusammen mit öl- und fetthaltigen Gleitmitteln oder Scheidenzäpfchen verwenden. Bei gleichzeitiger Anwendung von Medikamenten, die in Kontakt mit dem Kondom kommen können, ist ein Arzt oder Apotheker zur deren Verträglichkeit mit Kondomen zu befragen. Medizinische Hilfe ist möglichst schnell, jedoch mindestens innerhalb von 72 Stunden zu suchen, sollte ein Kondom während des Gebrauchs undicht werden oder bersten oder sollten Unverträglichkeiten auftreten.

Und weitere Hinweise...

Die Kondome originalverpackt, kühl, trocken und vor Sonnenlicht geschützt aufbewahren. Bitte die Chargennummer hinter dem Chargencodesymbol und das Verfallsdatum hinter dem Symbol „verwendbar bis“ auf der Verpackung beachten. Nach Ablauf des Verfallsdatums dürfen die Kondome nicht mehr verwendet werden. Kondome sind Medizinprodukte und dienen dazu, bei der Verhinderung von sexuell übertragbaren Infektionen und von Schwangerschaft unterstützend zu wirken. Keine Art von Verhütungsmittel garantiert einen 100%igen Schutz vor Schwangerschaft oder Infektionen.

UK Instructions for use

How to use...

Check the integrity of the individual condom pack (foil wrap). If it is obviously damaged or open, discard the condom and use a new condom from an undamaged pack. Put the condom on before the first contact between the penis and the partner's body. To this end, carefully remove the condom from the foil with your fingers in order to prevent damage from finger nails, jewellery, etc. Squeeze the reservoir (the tip of the condom) with your thumb and index finger so that it no longer contains any air. Retract the foreskin completely, place the condom on the erect penis with the rolled edge to the outside and roll it down the entire penis. One should stop and check if one feels the condom sliding down or that it is excessively tight on the penis, as this can lead to a tear in the condom. To this end, pull the penis out. In the process, hold the condom on the root of the penis. Pull the penis out in the same way soon after ejaculation, but, at the latest, before it begins to slacken. Use the condom only once. If used again, there may be an increased risk of failure of the condom or of an infection. Dispose of used condoms in the household waste and not in the toilet.

What else you should know...

These condoms are made of natural rubber latex, which may induce allergic reactions including anaphylactic shock in the case of persons who are allergic to latex. Use as additional lubricants only such that are identified as suitable for use with condoms. Do not use greasy lubricants, such as vaseline, baby oil, body lotions, massage oil, butter, margarine, etc., as these damage the condom. Never use together with oily or greasy lubricants or vaginal suppositories. In the event of simultaneous use of medication that may come into contact with the condom, a doctor or pharmacist should be asked regarding its compatibility with condoms. Medical assistance is to be sought as quickly as possible, but at least within 72 hours, should a condom become leaky or crack during use or should incompatibilities arise.

Some further info...

Store condoms in their original packaging, in a cool, dry place and protected from sunlight. Please heed the batch number behind the batch code symbol and the expiry date behind the use by symbol on the packaging. After the expiry date, the condoms can no longer be used. Condoms are medical devices whose purpose is to provide a supporting effect in the prevention of sexually transmitted infections and pregnancy. No type of contraceptive guarantees 100% protection against pregnancy or infections.

FR Mode d'emploi

Comment faire...

Vérifier l'intégrité de l'emballage individuel du préservatif (sachet film). S'il est visiblement endommagé ou ouvert, jeter le préservatif et utiliser un nouveau préservatif d'un emballage non endommagé. Mettre le préservatif avant tout contact entre le pénis et le corps du partenaire. À cette fin, sortir avec précaution le préservatif du film avec les doigts afin d'éviter tout endommagement dû aux ongles, bijoux, etc. Presser le réservoir (haut du préservatif) avec le pouce et l'index afin qu'il ne contienne plus d'air. Tirer complètement le prépuce vers l'arrière, mettre le préservatif avec le bord roulé à l'extérieur sur le pénis en érection et le dérouler sur l'intégralité du pénis. S'interrompre et effectuer une vérification si le préservatif semble glisser ou serrer excessivement le pénis, car il pourrait se déchirer. À cette fin, procéder au retrait du pénis. Maintenir le préservatif à la base du pénis. Juste après l'éjaculation, au plus tard avant qu'il ne soit plus en érection, procéder au retrait du pénis de la même manière. N'utiliser le préservatif qu'une seule fois. Une réutilisation présente un risque accru de défaillance du préservatif ou d'infection. Jeter les préservatifs usagés à la poubelle, non dans les toilettes.

Ce qu'il faut également savoir...

Ces préservatifs sont composés de latex en caoutchouc naturel, qui peut entraîner d'éventuelles réactions allergiques, y compris un choc anaphylactique, chez les personnes allergiques au latex. Comme lubrifiant supplémentaire, utiliser uniquement les produits indiqués comme étant adaptés aux préservatifs. N'utiliser aucun lubrifiant gras tel vaseline, huile pour bébé, lotions pour le corps, huile de massage, beurre, margarine, etc., car ils endommagent le préservatif. Ne jamais utiliser avec des lubrifiants contenant des corps gras ou huileux ni en association à des dispositifs vaginaux. En cas d'utilisation simultanée de médicaments pouvant entrer en contact avec le préservatif, demander conseil à un médecin ou à un pharmacien concernant leur compatibilité avec les préservatifs. Si un préservatif devait ne plus être étanche ou se déchirer pendant l'utilisation, ou si des signes d'intolérance devaient apparaître, rechercher une aide médicale le plus rapidement possible, toutefois dans un délai maximal de 72 heures.

Remarques supplémentaires...

Conservers les préservatifs dans leur emballage d'origine, dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière du soleil. Tenir compte du numéro de lot suivant le symbole de code de lot et de la date d'expiration suivant le symbole utilisable jusqu'en l'emballage. Une fois la date expirée, les préservatifs ne doivent plus être utilisés. Les préservatifs sont des dispositifs médicaux et aident à prévenir les infections sexuellement transmissibles ainsi qu'une grossesse. Aucune méthode de contraception ne garantit une protection efficace à 100 % contre une grossesse ou les infections.

ES Instrucciones de uso

Lo que hay que hacer...

Comprobar que el envase individual del preservativo (envoltorio) no esté dañado. Si estuviera claramente dañado o abierto, desechar el preservativo y utilizar uno nuevo cuyo envase no esté dañado. Colocar el preservativo antes de cualquier contacto entre el pene y el cuerpo de la pareja. Para ello extraer con los dedos el preservativo de su envoltorio teniendo cuidado de no dañarlo con las uñas, joyas, etc. Presione el depósito (punta del preservativo) con el pulgar y el dedo índice, de manera que se expulse todo el aire. Retraiga completamente el prepucio hacia atrás; con el reborde hacia fuera colocar el preservativo sobre el pene erecto y desenrollar recubriendo todo el pene. Se debe interrumpir y realizar una comprobación si se detecta que el preservativo se resbala o queda demasiado apretado, ya que esto podría provocar la rotura del preservativo. A tal efecto, retirar el pene sujetando el preservativo por la base. De la misma forma, retirar el pene poco después de la eyaculación y antes de que la erección disminuya. Utilizar el preservativo solo una vez. En caso de reutilización puede haber un mayor riesgo de fallo del preservativo o de infección. Desechar los preservativos usados con los residuos domésticos, no tirar al inodoro.

Información adicional...

Estos preservativos están fabricados con látex de caucho natural que en caso de alergia al látex puede llegar a provocar reacciones alérgicas e incluso un shock anafiláctico. Como lubricantes adicionales utilizar únicamente aquellos que sean compatibles con el uso de preservativos. No utilizar lubricantes que contengan grasa, tales como vaselina, aceite para bebés, lociones corporales, aceite de masaje, mantequilla, margarina, etc., ya que dañan el preservativo. No utilizar nunca con lubricantes que contengan grasa o aceite ni con supositorios vaginales. En caso de uso simultáneo de medicamentos que puedan entrar en contacto con el preservativo se debe consultar al médico o farmacéutico sobre su compatibilidad con los preservativos. Si un preservativo presenta filtraciones o se rompe o si se producen intolerancias, buscar asistencia médica a la mayor brevedad posible, en cualquier caso dentro de las 72 horas siguientes.

Y más advertencias...

Guardar los preservativos en su envase original en un lugar fresco, seco y protegido de la luz solar. Tener en cuenta el número de lote y la fecha de caducidad ubicados detrás del símbolo respectivo en el envase. Los preservativos no podrán ser utilizados después de la fecha de caducidad. Los preservativos son productos sanitarios y tienen por objeto ayudar a evitar el embarazo y las infecciones de transmisión sexual. Ningún tipo de anticonceptivo garantiza una protección del 100 % frente a embarazos o infecciones.

IT Istruzioni per l'uso Come indossarlo...

Verificare che la confezione singola del preservativo (bustina protettiva) sia integra. Nel caso in cui sia evidentemente danneggiata o aperta, gettare via il preservativo e utilizzarne un altro prelevato da una confezione integra. Indossare il preservativo già precedentemente al primo contatto fra il pene e il corpo del partner. A questo scopo prelevare il preservativo dalla bustina con le dita facendo molta attenzione, al fine di evitare danneggiamenti causati da unghie, gioielli ecc. Premere il serbatoio (punta del preservativo) con pollice e indice, in modo tale che non contenga più aria. Tirare completamente indietro il prepuzio e posizionare il preservativo sul pene eretto con l'anello guida verso l'esterno, dopodiché srotolarlo lungo tutto il pene. È necessario interrompere la procedura per effettuare una verifica se si nota che il preservativo possa scivolare o si trovi eccessivamente in tensione sul pene, poiché ciò potrebbe condurre a una rottura del materiale. Per fare ciò, ritirare il pene. Tenere il preservativo ben saldo alla base del pene. Allo stesso modo estrarre il pene dal preservativo subito dopo l'eiaculazione o al più tardi prima che diventi flaccido. Utilizzare il preservativo solo una volta. In caso di secondo utilizzo, è presente un rischio elevato di rottura del preservativo o di infezione. Gettare i preservativi usati nella spazzatura domestica e non nel water.

Cosa bisogna sapere...

Questi preservativi sono realizzati in lattice di caucciù naturale, che può causare reazioni allergiche e choc anafilattici nei soggetti allergici a questo materiale. Come lubrificanti agglutivanti utilizzare esclusivamente quelli indicati come compatibili con i preservativi. Non utilizzare lubrificanti che contengono grassi, come vasellina, olio per bambini, lozioni per il corpo, olio per massaggi, burro, margarina ecc., poiché potrebbero danneggiare il preservativo. Non usare mai insieme a lubrificanti a base oleosa o grassa ad a supposte vaginali. In caso di assunzione di medicinali che possono entrare in contatto con il preservativo, informarsi presso un medico o un farmacista circa la loro compatibilità con i preservativi. Qualora il preservativo si fori o si rompa durante l'utilizzo o sorgano delle intolleranze, è necessario consultare un medico il prima possibile, almeno entro le prime 72 ore.

Altre informazioni importanti...

Conservare i preservativi nella confezione originale in luogo fresco, asciutto e al riparo dai raggi solari. Osservare il numero di lotto dietro il simbolo del codice di lotto e la data di scadenza dietro il simbolo "utilizzare entro il" sulla confezione. Non utilizzare i preservativi dopo la data di scadenza. I preservativi sono dispositivi medici e sono di aiuto nella prevenzione di infezioni sessualmente trasmissibili o gravidanze. Nessun metodo contraccettivo assicura una protezione al 100% da gravidanze o infezioni.

NL Gebruiksaanwijzing Hoe je het goed doet ...

Controleer de losse condomverpakking (foliebriefje) op schade. Gooi het condom weg als de condomverpakking zichtbaar beschadigd of geopend is en neem een nieuw condom uit een onbeschadigde verpakking. Doe het condom al om vóór het contact van de penis met het lichaam van de partner. Haal het condom daarvoor voorzichtig met de vingers uit de folie om schade door vingernagels, sieraden en dergelijke te vermijden. Druk het reservoir (punt van het condom) met duim en wijsvinger dicht, zodat er geen lucht meer in zit. Trek de voorhuis helemaal terug, plaats het condom met de rolrand naar buiten op de stijve penis en rol het condom over de hele penis af. Stop met vrijen en voer een controle uit bij het gevoel dat het condom van de penis glijdt of te strak spant. Te sterke spanning kan ertoe leiden dat het condom scheurt. Trek daarvoor de penis terug. Houd het condom aan het begin van penis vast. Trek de penis kort kan de ejaculatie, echter uiterlijk voordat hij begint slapper te worden op dezelfde wijze eruit. Gebruik het condom maar één keer. Bij hergebruik van een condom bestaat een verhoogd risico voor het falen van het condom of voor een infectie. Gooi gebruikte condoms in het huisafval en niet in het toilet.

Wat nog belangrijk is ...

Deze condoms zijn van natuurlijk latex rubber dat bij mensen met een latexallergie eventueel tot een allergische reactie en zelfs tot een anafylactische shock kan leiden. Als extra glijmiddelen mogen alleen middelen worden gebruikt waarop staat aangegeven dat deze geschikt zijn voor condoms. Gebruik geen vethoudende glijmiddelen zoals vaseline, babyolie, bodylotion, massageolie, boter, margarine enz. omdat deze schadelijk zijn voor het condom. Noot gebruikte in combinatie met olie- of vethoudende glijmiddelen of vaginale zetpillen. Bij gelijktijdige inname van medicijnen die in contact kunnen komen met het condom, dient een arts of apotheker te worden geraadpleegd i.v.m. de verdraagzaamheid van het medicijn met condoms. Indien een condom tijdens het gebruik lek raakt of scheurt en in geval van een onverdraagzaamheid dient onmiddellijk, echter uiterlijk binnen 72 uur medische hulp te worden ingeroepen.

Nog een paar opmerkingen...

Bewaar condoms in de originele verpakking op een koele, droge en tegen zonlicht beschermde plaats. Let op het charge-nummer achter het chargecodesymbool en de vervaldatum achter het symbool "te gebruiken tot" op de verpakking. Na afloop van de vervaldatum mogen condoms niet meer worden gebruikt. Condoms zijn medische hulpmiddelen en bedoeld als ondersteuning om seksueel overdraagbare aandoeningen en zwangerschappen te vermijden. Geen preservatief garandeert 100%-bescherming tegen zwangerschap of infecties.

RU Инструкция по использованию Как обращаться...

Проверьте целостность упаковки отдельного презерватива (конвертик из фольги). Если она явно повреждена или открыта, откажитесь от использования такого презерватива и воспользуйтесь новым презервативом из неповрежденной упаковки. Презерватив должен быть надет еще до первого контакта полового члена с телом партнера. Для этого осторожно достаньте презерватив пальцами из фольги, стараясь избежать его повреждения ногтями, украшениями и т.д. Сожмите расположенный на кончике презерватива резервуар большим и указательным пальцами, чтобы в нем не было воздуха. Полностью оттяните крайнюю плоть назад, расположите презерватив на головке возбужденного полового члена резинowym кольцом наружу и расправьте его во всю длину полового члена. Необходимо прекратить процесс полового сношения и осуществить дополнительную проверку, если вам покажется, что презерватив сползает или слишком сжимает половой член, поскольку это может привести к разрыву презерватива. Для этого вытаскивайте половой член, удерживая презерватив у основания полового члена. Таким же образом вытаскивайте половой член после эякуляции, еще до того как эрекция начнет спадать. Используйте презерватив только один раз. При повторном использовании повышается опасность того, что презерватив не выполнит своих защитных функций, а также увеличивается риск передачи инфекции. Использующие презервативы утилизируют вместе с домашним мусором, не выбрасывая их в унитаз.

Что еще необходимо знать...

Данные презервативы состоят из латекса на основе натурального каучука, который может вызвать у испытывающих к латексу аллергию или аллергические реакции, включая анафилактический шок. В качестве дополнительной смазки используйте только такие смазочные средства, которые не разрушают материал презерватива. Не используйте лубриканты на жировой основе, такие как вазелин, детское масло, лосьоны для тела, массажное масло, сливочное масло, маргарин и т.д., поскольку они могут повредить презерватив. Никогда не используйте презервативы вместе со смазками, содержащими масло и жир, или вагинальными свечами. При одновременном использовании медикаментов, которые могут вступить в контакт с презервативом, необходимо получить консультацию врача или фармацевта об их совместимости с презервативами. Если во время использования презерватива обнаружится его негерметичность, он разорвется или же вывится его непереносимость, то следует как можно быстрее – в любом случае не позднее, чем в течение 3 суток – обратиться за медицинской помощью.

И дополнительные указания...

Храните презервативы в оригинальной упаковке в сухом, прохладном и защищенном от попадания солнечных лучей месте. Пожалуйста, обратите внимание на номер партии, размещенный после символа кода партии, и дату истечения срока годности, указанную после символа "использовать до" на упаковке. После истечения срока годности презервативы не подлежат использованию. Презервативы являются медицинскими изделиями, предназначенными для предотвращения заражения передающимися половым путем инфекционными заболеваниями и для предотвращения беременности. 100%-ую защиту от беременности или инфекций не гарантирует ни один вид средств контрацепции.



Gebruiksaanwijzing beachten
pay attention to the instructions for use
respecter le mode d'emploi
consultense las instrucciones de uso
osservare le istruzioni per l'uso
gebruiksaanwijzing in acht nemen
соблюдать инструкцию
по использованию

ISO 4074

Art.10004/2023-01



nicht wiederverwenden, do not re-use,
ne pas réutiliser, no reutilizar, non riutilizzare,
niet opnieuw gebruiken,
ne использовать повторно



bei beschädigter Verpackung nicht verwenden,
not to be used in case the package is damaged,
ne pas utiliser en cas d'emballage endommagé,
no utilizar si el envase está dañado,
non utilizzare se la confezione è danneggiata,
niet gebruiken bij beschadigde verpakking,
ne использовать при повреждении упаковки



enthält Naturkautschuklatex,
contains natural rubber latex,
contient du latex de caoutchouc naturel,
contiene látex de caucho natural, contiene lattice
di caucciù natural, bevat natuurlijk latex rubber,
odержит натуральный латекс



von Sonnenlicht fernhalten,
protect from sunlight,
tenir à l'abri de la lumière du soleil,
mantener alejado de la luz solar,
proteggere dai raggi solari, tegen zonlicht
beschermen, беречь от солнечного света



trocken aufbewahren, store in a dry place,
conserver dans un endroit sec,
conservare in luogo secco, droog bewaren,
хранить в сухом месте



Chargencode, batch code, code de lot,
número de lote, número de lotto,
chargecode, код партии



verwendbar bis, use by, utilisable jusqu'en,
fecha de caducidad, utilizzabile entro il,
te gebruiken tot, использовать до



Hersteller, manufacturer,
fabricant, fabricant,
produttore, fabricant, изготовитель



Artikelnummer, article number,
número d'article, número de artículo,
codice articolo,
artikelnummer, арт. №



Medizinprodukt, Medical Device, Dispositif
médical, Producto sanitario, Dispositivo médico,
Medisch hulpmiddel, Медицинское изделие