




1



2

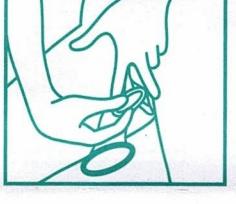

3



4



5



6



7

en

IMPORTANT INFORMATION

The FC2 Female Condom® is free of natural rubber latex.

A female condom, also known as an internal condom, is designed to be retained in the vagina during sexual intercourse to prevent pregnancy and sexually transmitted infections (STIs).

Store at room temperature in a dry place away from direct sunlight.

No barrier method, including male condoms or female condoms, provide 100% protection against pregnancy and STIs.

Important things to note for the best protection with the FC2:

- Before you try the FC2, be sure to read the directions and learn how to use it correctly.
- Practice putting the FC2 in the vagina without having sex to get familiar with how it works.

Using the FC2:

- The FC2 is inserted before sex. Most people insert the FC2 between 2 to 20 minutes before sex.
- FC2 can be used with most commercially available sexual lubricants.

Risks of using FC2:

- Use the FC2 correctly every time you have sex. If the FC2 is not used correctly every time, your risk of getting a sexually transmitted infection or becoming pregnant will be higher.

• Incorrect use may result in the FC2 not providing protection. To avoid risk of incorrect use, read the instructions carefully prior to use.

* The following events are rare but can occur when using the FC2:

- Discomfort during insertion
- Pain after insertion, before sex
- Discomfort during sex
- Burning sensation, rash or itching

Any serious incident that has occurred in relation to the device must be reported to the manufacturer and the competent authority of the Member State in which the user lives.

Before opening:

- Check expiry date on sachet.
- Spread lubrication around by rubbing packet with hands.
- Open sachet: tear down from top of sachet.

1

The FC2 is made of nitrile (synthetic).

▲ Inner ring, used for insertion and holds condom in place.

▼ Outer ring, covers the external genitalia.

2

Squeeze sides of inner ring together to form a point.

3

Insert squeezed ring into vaginal.

4

Push up as far as it will go. Condom should not be twisted.

5

Before sex. Guide penis inside condom.

6

Removal. Hold and twist outer ring, pull out.

7

Discard in rubbish bin. Do not flush. Flushing FC2 would be an environmental hazard.

it

INFORMAZIONI IMPORTANTI

Il preservativo femminile FC2® non contiene lattice di gomma naturale.

Un preservativo femminile, noto anche come preservativo interno, è disegnato per essere trattenuato nella vagina durante il rapporto sessuale per prevenire la gravidanza e le infezioni sessualmente trasmissibili (IST).

Conservare a temperatura ambiente in un luogo asciutto al riparo dalla luce solare diretta.

Nessun metodo di protezione compare nel preservativo femminile o femminile, fornisce una protezione del 100% contro la gravidanza e le malattie sessualmente trasmissibili (IST).

Cose importanti da notare per la migliore protezione:

- Prima di provare FC2, assicurarsi di leggere le istruzioni e di imparare a usarlo correttamente.
- Esercitarsi a inserire FC2 nella vagina senza avere un rapporto sessuale per familiarizzarsi con l'utilizzo.

Utilizzo di FC2:

- FC2 dovrebbe essere introdotto prima del rapporto sessuale. La maggior parte delle persone inserisce FC2 20-30 minuti prima del rapporto.
- FC2 può essere utilizzato con la maggior parte dei lubrificanti sessuali disponibili in commercio.

Rischi derivanti dall'utilizzo di FC2:

- Usare il FC2 senza FC2 ogni volta che si ha un rapporto sessuale. Se FC2 non viene utilizzato correttamente ogni volta, il rischio di un'infezione o di una trasmissione sessuale o di

rimanere incinta sarà maggiore.

• L'uso imprudente può impedire al FC2 di proteggere l'utero. Per evitare il rischio di uso imprudente, leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso.

I seguenti eventi sono rari, ma potrebbero verificarsi quando si utilizza FC2:

- Disagio durante l'insersione.
- Dolori dopo l'insersione, prima del rapporto.
- Disagio durante il rapporto sessuale.
- Sensazione di bruciore, eruzione cutanea o prurito.

Qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo deve essere segnalato al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui risiede l'utente.

Prima dell'apertura:

- Verificare la data di scadenza indicata sulla bustina.
- Stendere il lubrificante strofinando la bustina con le mani.

Aprire la busta: strappare la bustina dove indicato dalla frecia in alto.

1

FC2 è realizzato in nitrile (synetetico).

▲ L'anello interno, utilizzato per inserire e tenere fermo il preservativo.

▼ L'anello esterno copre i genitali esterni

2

Stringere insieme i lati dell'anello interno per formare un punto.

3

Introdurre l'anello stretto nella vagina.

4

Spingere più a fondo possibile. Il preservativo non deve essere attorcigliato.

5

Prima del rapporto sessuale. Guidare il pene all'interno del preservativo.

6

Rimozione. Mantenere e ruotare l'anello esterno, poi estrarlo.

7

Gettare il preservativo femminile nella spazzatura, non nel water. Gettare FC2 nel water rappresenterebbe un pericolo per l'ambiente.

Qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo deve essere segnalato al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui risiede l'utente.

Prima dell'apertura:

- Verificare la data di scadenza indicata sulla bustina.
- Stendere il lubrificante strofinando la bustina con le mani.

Aprire la busta: strappare la bustina dove indicato dalla frecia in alto.

1

FC2 è realizzato in nitrile (synetetico).

▲ Utilizzato per inserire e tenere fermo il preservativo.

▼ L'anello esterno copre i genitali esterni

2

Stringere insieme i lati dell'anello interno per formare un punto.

3

Introdurre l'anello stretto nella vagina.

4

Stumkite gilyn kiek jėmam. Prezervatyvas neturėtumėti naudoti pavojus, prieš naudodami atidžiai perskaitykite instrukcijas.

* Šie atvejai yra reti, bet gal atsirodi naudojant FC2:

• Diskomfortas prezervatyve.

• Pain after insertion, before sex

• Discomfort during sex

• Burning sensation, rash or itching

Any serious incident that has occurred in relation to the device must be reported to the manufacturer and the competent authority of the Member State in which the user lives.

Before opening:

Check expiry date on sachet.

Spread lubrication around by rubbing packet with hands.

Open sachet: tear down from top of sachet.

5

Prieš seksą. Reguliukite peni prezervatyvo viduje.

6

Pašalinimas. Laikykite ir pasukite išorinį žiedą, ištraukite.

7

Išsimkite į šiuoliškių dėžę. Neplaukite. FC2 plovimas kelty pavoju aplinkai.

Apie bet kokią rimtą su prezervatyvu susijusią incidentą turėti praneštė gamintojui ir valstybės narės, kurios givyrė išvengimui.

8

Prieš atidėtar pakute:

* Patikrinkite galiojimo datą prieš pakute.

* Aplink padenkite lubrikantu.

9

Pakutes atidarymas:

* Diskomfortas sekso metu

* Deginimo pojūtis, bérumas arba niežulys

Aliai kambario temperatūra sausoje vietoje, apsaugotoje nuo tiesioginių šaunelių spausdinimo. Nei viena apsaugos priemonė yra "viršių" ar moteriški prezervatyvai, neatsiėmianti naudotuose 100 proc. apsaugos nuo niežulio.

10

Svarbi informacija

Moteriško prezervatyvo FC2 sudėtėje yra naudojamas FC2 galli nesuteiktas apsaugos. Kad išvengtumėte neturinamo naudojimo pavojus, prieš naudodami atidžiai perskaitykite instrukcijas.

* Šie atvejai yra reti, bet gal atsirodi naudojant FC2:

• Diskomfortas prezervatyve.

• Pain after insertion, before sex

• Discomfort during sex

• Burning sensation, rash or itching

Any serious incident that has occurred in relation to the device must be reported to the manufacturer and the competent authority of the Member State in which the user lives.

Before opening:

Check expiry date on sachet.

Spread lubrication around by rubbing packet with hands.

Open sachet: tear down from top of sachet.

11

Prieš seksą. Reguliukite peni prezervatyvo viduje.

12

Pašalinimas. Laikykite ir pasukite išorinį žiedą, ištraukite.

13

Išsimkite į šiuoliškių dėžę. Neplaukite. FC2 plovimas kelty pavoju aplinkai.

Apie bet kokią rimtą su prezervatyvu susijusią incidentą turėti praneštė gamintojui ir valstybės narės, kurios givyrė išvengimui.

14

Prieš atidėtar pakute:

* Patikrinkite galiojimo datą prieš pakute.

* Aplink padenkite lubrikantu.

15

Pakutes atidarymas:

* Diskomfortas sekso metu

* Deginimo pojūtis, bérumas arba niežulys

Aliai kambario temperatūra sausoje vietoje, apsaugotoje nuo tiesioginių šaunelių spausdinimo.