

GB Gebrauchsanweisung: Das Kondom schon bei der Entnahme aus der Verpackung vorsichtig behandeln, um Beschädigungen durch Fingeragel, Schmutz usw. zu vermeiden. Das Kondom muss vor dem ersten Kontakt zwischen dem Penis und dem Körper des Partners über den erigierten Penis gestreift werden, um bei der Verhinderung von sexuell übertragbaren Infektionen und von Schwangerschaft unterstützend wirken zu können. Halten Sie das Reservoir an der Spitze des Kondoms so mit Daumen und Zeigefinger, dass dort kein Luftpolster entsteht. Rollen Sie das Kondom über den Penis ab. Falls Sie spüren, dass das Kondom abrischt oder übermäßig auf dem Penis spannt, unterbrechen Sie und überprüfen Sie den Sitz, da dies zu einem Riss führen kann. Eventuell müssen Sie eine andere Kondomgröße wählen. Sie müssen den Penis bald nach der Ejakulation zurückziehen, wobei das Kondom am Penisansatz festzuhalten ist. Bei Verwendung eines zusätzlichen Gleitmittels ist es erforderlich, nur solche zu verwenden, die für den Gebrauch mit Kondomen als geeignet ausgewiesen sind. Die Anwendung fetthaltiger Gleitmittel wie Vaseline, Baby Öl, Körperlotionen, Massageöle, Butter, Margarine usw. ist zu vermeiden, da diese die Unversehrtheit des Kondoms beeinträchtigen. Bei gleichzeitiger Anwendung von Medikamenten, die in Kontakt mit dem Kondom kommen können, ist es erforderlich, einen Arzt oder Apotheker zu deren Verträglichkeit zu konsultieren. Sollte ein Kondom während des Gebrauchs undicht werden oder bersten, suchen Sie möglichst schnell medizinische Hilfe, mindestens innerhalb von 72 Stunden. Wenn die Einzelpackung (Folie) offensichtlich beschädigt ist, neu verpacktes dieses Kondom und verwenden Sie ein weiteres aus einer unbeschädigten Packung. Entsorgen Sie das gebrauchte Kondom im Abfallimer und nicht in der Toilette. Verwenden Sie das Kondom nur einmal, da wenn das Kondom wiederverwendet wird, ein erhöhtes Risiko für ein Versagen oder für eine Infektion gegeben ist. Kondomen sind aus Naturkautschuklatex hergestellt und können dadurch eventuelle allergische Reaktionen einschließlich einer anaphylaktischen Schock hervorrufen. Ken Verhütungsmittel kann einen 100% Schutz garantieren.

GB Instructions of use: Handle the condom carefully, including removal from the package so as to avoid damage to the condom by fingernails, jewellery etc. The condom should be placed on the erect penis before any contact occurs between the partner's body and the penis to assist the prevention of sexually transmitted infections and pregnancy. Hold the reservoir between thumb and forefinger, remove any air remaining in the tip of the condom by squeezing it between thumb and forefinger. Unroll the condom over the penis. Stop and check if you feel the condom slipping off or tightening excessively onto the penis because this might lead to breakage. Perhaps you have to choose another condom size. Withdraw the penis soon after ejaculation, while still holding the condom firmly in place at the base of the penis. If an additional lubricant is desired, use the correct type of lubricant which is recommended for use with condoms and avoid the use of oil-based lubricants, such as petroleum jelly, baby oil, body lotions, massage oils, butter, margarine, etc., as these are deleterious to the integrity of the condom. Consult a doctor or pharmacist about the compatibility of topical medicaments that might consist in contact with the condom. Seek medical assistance as soon as possible, at the earliest within 72 h should a condom leak or burst during use. If the individual container is obviously damaged, discard that condom and use a new one from an undamaged package. Dispose the condom in a waste bin. Do not flush down the toilet. The condom is for single use only and if reused there might be an increased risk of failure or infection. The condom is made of natural rubber latex, which might cause allergic reactions including anaphylactic shock if the user is allergic to latex. No contraceptive can guarantee 100% protection.

ES Instrucciones de uso: Abra y retire el preservativo de su envoltura con cuidado para evitar dañar con las uñas, joyas etc. Coloque el preservativo en la cabeza del pene erecto antes de que se produzca cualquier contacto con el cuerpo de su pareja para ayudar en la prevención de las infecciones de transmisión sexual y el embarazo. Sujete el preservativo por el depósito en la punta entre los dedos pulgar e índice para evitar que se forme una burbuja de aire

al dentro. Desenrolle el preservativo a lo largo del pene hasta llegar a la base. Si siente que el preservativo se resbala o se aprieta excesivamente, déjelo que se comprime porque podría romperse. Puede ser que requiera una talla mayor o menor del preservativo. Después de eyacular retire el pene pronto, sostenga el preservativo desde su base. Si desea usar lubricantes adicionales se debe usar únicamente aquellos tipos correctos que se designados como aptos para el uso con preservativos. Es necesario a evitar el uso de aceites a base de petróleo, tales como vaselina, aceite de bebé, lociones corporales, aceites de masaje, mantequilla, margarina o parecidos ya que estos afectan la integridad del preservativo. Si usa medicamentos tópicos que podrían tener contacto con el preservativo, consulte a un médico o farmacéutico acerca de su compatibilidad con el preservativo. Si el preservativo muestra fugas o se rompe durante el uso, busque ayuda médica lo más pronto posible y dentro de las 72 horas. Si la envoltura (lámina de aluminio) del preservativo está deteriorada obviamente, deséchelo y use un preservativo con un empaque intacto. Tire el preservativo usado en la basura y no en el inodoro. Use el preservativo una sola vez. Reutilizarlo da un mayor riesgo de fracaso o infección. Condones son hechos de látex de caucho natural y por lo tanto pueden causar reacciones alérgicas incluyendo un shock anafiláctico. Ningún dispositivo anticonceptivo puede garantizar una protección al 100%.

FR Mode d'emploi : Manipuler le préservatif avec précaution, y compris lorsque vous le retirez de son emballage, de sorte à éviter tout dommage causé par les ongles, les bijoux, etc. Le préservatif doit être placé sur le pénis en érection avant tout contact entre le pénis et le corps du partenaire pour favoriser la prévention de la transmission de maladies sexuellement transmissibles et pour éviter la survenue d'une grossesse. Tenez le réservoir entre le pouce et l'index et évacuez l'air restant dans l'extrémité du préservatif en y passant sur le pouce et l'index. Déroulez le préservatif sur le pénis. Arrêtez et vérifiez l'état du préservatif sur celui-ci glissé ou adhérent trop fortement au pénis étant donné que cela peut occasionner une rupture. Vous devriez peut-être choisir une autre taille de préservatif si le pénis immédiatement après l'éjaculation en maintenant fermement le préservatif en place à la base du pénis. Si un lubrifiant supplémentaire est souhaité, utilisez un type adapté de lubrifiant recommandé pour être utilisé avec des préservatifs et éviter l'utilisation de lubrifiants à base d'huile, comme la vaseline. L'huile pour bébé les lotions pour le corps, les huiles de massage, le beurre, la margarine, etc. étant donné que ces produits peuvent compromettre l'intégrité du préservatif. Consultez un médecin ou un pharmacien pour connaître la compatibilité des traitements topiques qui pourraient entrer en contact avec le préservatif. Veuillez prendre un avis médical dès que possible, au moins dans les 72 heures, si un préservatif fuit ou se déchire pendant son utilisation. Si l'emballage individuel est manifestement endommagé, jetez le préservatif et utilisez-en un nouveau en trouvant dans un emballage intact. Jetez le préservatif dans une poubelle. Ne pas jeter dans les toilettes. Le préservatif est conçu exclusivement pour un usage unique, s'il est réutilisé, le risque de défaillance ou d'infection est accru. Le préservatif est en latex de caoutchouc naturel ce qui peut engendrer des réactions allergiques, y compris un choc anaphylactique, si l'utilisateur est allergique au latex. Aucun contraceptif ne peut garantir une protection totale.

IT Istruzioni per l'uso: prestare attenzione nel maneggiare il profilattico, anche quando lo si estrae dalla confezione, per evitare di danneggiarlo con unghie, gioielli, ecc. Appoggiare il profilattico sul pene eretto prima che questo entri in contatto con il corpo della partner per assistere nella prevenzione delle infezioni sessualmente trasmesse e della gravidanza. Tenere il serbatoio tra il pollice e l'indice e sgrindere tra le dita per eliminare l'aria eventualmente rimasta nella punta del profilattico. Srotolare il profilattico lungo il pene. Fermarsi e controllare che il profilattico non scivoli fuori o che non stringa eccessivamente il pene per evitare la possibilità di rottura. In questo caso si deve forse scegliere un profilattico di misura diversa. Sfilare il pene subito dopo l'eiaculazione, tenendo fermo il profilattico alla base del pene. Se si desidera utilizzare un lubrificante addizionale, scegliere il tipo corretto, raccomandato per l'uso con profilattici; evitare di utilizzare lubrificanti a base oleosa, come vaselina, olio, per bambini, latte per il corpo, oli di massaggio, burro, margarina, ecc., poiché hanno effetti dannosi sul profilattico. Consultare il medico o il farmacista per la compatibilità

con medicinali topici che potrebbero entrare in contatto con il profilattico. In presenza di perdite o se il profilattico si rompe durante l'uso, rivolgersi al più presto a un medico o almeno entro 72 ore. Se la confezione singola presenta evidenti segni di danno, smaltire il profilattico e utilizzare una nuova confezione integra. Smaltire il profilattico nel cestino dei rifiuti. Non gettarlo nel WC. Il profilattico è esclusivamente monouso; se riutilizzato il rischio di rottura o infezione potrebbe essere più elevato. Il profilattico è realizzato in lattice di gomma naturale, che potrebbe provocare reazioni allergiche, compreso shock anafilattico se l'utilizzatore è allergico al lattice. Nessun contraccettivo può garantire una protezione del 100%.

BG Инструкции за употреба: Дръжте внимателно презерватива, включително докато го vadите от опаковката, за да не бъде повреден от нокти, бижута и др. Презервативът трябва да бъде поставен върху еректирания пенис преди контакт между пениса и тялото на партньора за да се предотврати полова предаване инфекции и бременност. Захванете резервоара с палеца и показалеца и изкарайте въздуха, останавя във върха на презерватива, като го стиснете между палеца и показалеца. Развийте презерватива, докато покрие пениса. Спрете и проверете дали презервативът се изхвърля или стига прекомерно около пениса, защото това може да доведе до скъсване. Може да се наложи да изберете друг размер презерватив. Извадете пениса скоро след еякулация, докато пръдържате презерватива на място в основата на пениса. Ако желаете допълнително лубрикант, използвайте правилния вид, който се препоръчва за употреба с презервативи и избягвайте употребата на лубриканти на маслена основа като вазелин, бебешко олио, лосиони за тяло, маслено олио, масло, магарина и т.н., тъй като те са вредни за целостта на презерватива. Консултирайте се с лекар или фармацевт за съвместимостта с лекарствата за локално приложение, които може да влезат в контакт с презерватива. Потърсете медицинска помощ в случаите на повреда на опаковката на 72 часа – ако презервативът протече или се скъса по време на употреба. Ако индивидуалната опаковка е очевидно повредена, нахвърлете тогавашния презерватив и използвайте нова, изхвърляйки опаковката. Изхвърляйте презерватива в кошчето за боклук. Не хвърляйте презерватива в тоалетна. Презервативът е за еднократно употреба и ако се използва повторно, има риск от скъсване или инфекция. Презервативът е направен от латекс от естествени каучук, който може да предизвика алергични реакции, включително анафилактичен шок, ако потребителят е алергичен към латекс. Никой метод за контрацепция не гарантира 100% защита.

PL Instrukcja użycia: Ostrożnie obchodź się z prezerwatywą, także przy wyjmowaniu z opakowania; aby nie uszkodzić jej paznokciami, biżuterią itp. Prezerwatywę należy nakładać na penisa w wzwroździe, zanim dojdzie do jakiegokolwiek kontaktu z ciałem partnerki/partnera, aby zapewnić odpowiednią ochronę przed chorobami przenoszonymi drogą płciową i ciążyą. Przytrzymajcie zbiorniczek kciukiem i palcem wskazującym oraz ścisnąć końcówkę prezerwatywy, aby usunąć z niej powietrze. Rozwinąć prezerwatywę, nie zsuniwając jej z penisa. Sprawdzić, czy prezerwatywa nie zsunięła się za bardzo, ponieważ to może doprowadzić do pęknięcia. Być może trzeba wybrać inną wielkość prezerwatywy. Zwrócić uwagę na uszkodzenia opakowania, jeżeli opakowanie jest uszkodzone, wyrzucić ją i użyć prezerwatywy z nowego, nieuszkodzonego opakowania. Wyjąć jednorazowego, ponowne użycie może osłabić jej skuteczność lub spowodować infekcję. Prezerwatywa jest wykonana z lateksu kauczuku naturalnego, który może powodować reakcje alergiczne oraz prowadzić do wstrząsu anafilaktycznego u użytkowników uczulonych na lateks. Żadna metoda antykoncepcyjnie

jest w 100% niezawodna.

SE Bruksanvisning: Hantera kondom försiktigt, även när du tar ut den ur förpackningen, så att inte skadas av naglar, smycken och liknande. Kondomen ska sitta på den erigerade penisens innera nagon kontakt mellan penisen och partners kropp sk. Det bidrar till ett säkert skydd mot sexuellt överförbara sjukdomar och graviditet. Håll behållaren långt över på kondomen mellan tummen och pekfingeret och krama ur all luft som finns där genom att klämma kondomen mellan tummen och pekfingeret. Rulla ut kondomen längs penisen. Pausa och kontrollera om det känns som att kondomen glider av eller siltar för hårt, eftersom det kan göra att den går sönder. Om det händer kanske du behöver en annan kondomstorlek. Dra åt kondomen så snart som möjligt efter utfösning, och håll kondomen på plats vid penisrotten. Om det behövs ytterligare glidmedel bör du välja ett lämpligt glidmedel som rekommenderas för användning med kondom. Undvik oljebaserade glidmedel som vaselin, babyolja, kroppslotion, massagolja, smör, margarin osv, eftersom dessa kan bryta ned kondomen. Fråga läkare eller apotekspersonal om kondomen är kompatibel med eventuella utvärtes läkemedel som kan komma i kontakt med kondomen. Om kondomen läcker eller går sönder under användningen bör du och din partner rådfråga läkare eller apotekspersonal så snart som möjligt, senast inom 72 timmar. Om en enskild kondomförpackning är synligt skadad ska kondomen slängas. Använd istället en ny eller en oskadad förpackning. Kasta kondomen i en papperskorg. Spola inte ned den i toaletten. Kondomen är endast för engångsbruk. Återanvändning kan innebära ökad risk för smitta och att den inte fungerar som den ska. Kondomen är tillverkad av naturgummi-latex som kan orsaka allergiska reaktioner, inklusive anafylaktisk chock om användaren är allergisk mot latex. Inget preventivmedel är 100% effektivt.


DK Brugsanvisning: Vær omhyggelig ved behandlingen af kondomet, herunder ved udfoldningen fra indpakningen, for at undgå beskadigelse af kondomet fra fingernagel, smykker osv. Kondomet skal bringes på den erigerede penis inden kontakt mellem penis og partners krop for at hjælpe med forebyggelse af graviditet og seksuelt overførte sygdomme. Hold hulrummet mellem tommel- og pegefinger, og fjern al luft i kondomens spids ved at klemme det ud mellem tommel- og pegefinger. Rul kondomet ned over penis. Stop og kontroller, om du føler kondomet glide af eller stramme for meget på penis, fordi begge dele kan føre til sprængning. Måske skal du vælge en anden kondomstørrelse. Træk penis tilbage straks efter udføsning, mens du holder kondomet sikkert på plads ved penisroten. Hvis du ønsker yderligere glidecreme, skal du anvende korrekt type glidecreme, som anbefales til brug sammen med kondomer, og undgå brug af oliebaserede cremer, f.eks. vaselin, babyolie, bodylotion, massageolie, smør, margarin osv., da disse er skadelige for kondomets holdbarhed. Spørg en læge eller apotekspersonal om foreneligheden af ildvortes lægemidler, der kan komme i kontakt med kondomet. Spørg lægehjælp snarest muligt og senest efter 72 timer, såfremt et kondom bliver utæt eller brister ved brug. Hvis den enkelte indpakning klart er beskadiget, skal det kondom kasseres og et nyt anvendes fra en ubeskadiget indpakning. Bortskaf kondomet i en affaldsbeholder. Det må ikke skylles ud i toiletet. Kondomet er kun til engangsbrug, selv det genbruges, er der en forøget risiko for svigt eller infektion. Kondomet er fremstillet af naturligt gummi-latex, som kan give allergiske reaktioner herunder allergisk shock (anafylaktisk shock), hvis brugeren er allergisk over for latex. Ingen antikonception kan garantere 100% beskyttelse.

NL Gebruiksaanwijzing: Ga voorzichtig met het condom om, waaronder bij het verwijderen van de verpakking, om beschadiging door nagels, sieraden etc. te voorkomen. Om een zwangerschap of een seksueel overdraagbaar infectie te voorkomen moet het condom over de erectie penis worden gedaan voordat er enig contact optreedt tussen de penis en het lichaam van de partner. Houd het reservoir tussen duim en wijsvinger, en verwijder eventueel achtergebleven lucht in de punt van het condom door de tip met duim en wijsvinger leeg te drukken. Rol het condom over de penis. Stop en controleer of u het condom voelt afglijden of voelt dat het te strak om de penis zit, omdat dit lekken zou kunnen veroorzaken. In die gevallen moet u mogelijk een andere maat condom kiezen. Ter u het condom vrij snel na de ejaculatie terug verwijt u het condom aan de basis van de penis stetig over zijn plaats houdt. Als er extra glidmiddel nodig is, gebruikt u het juiste soort glidmiddel dat aanbevolen wordt voor gebruik met condoms, en

MY.SIZE

MEASURE FOR PLEASURE!

vermijdt u het gebruik van glidmiddelen op oliebasis, zoals vaseline, babyolie, bodylotion, massageolie, bodom, margarine enz. omdat deze de integriteit van het condom ernstig aantasten. Vraag een arts of apotheker of plaatselijk gebruikte ganesmiddelen die mogelijk in contact komen met het condom, schadelijk kunnen zijn voor het condom. Zoek zo snel mogelijk medische hulp, maar in ieder geval binnen 72 uur, als een condom tijdens gebruik heeft gelekt of is gescheurd. Als de individuele verpakking duidelijk beschadigd is, moet u dat condom weglaten en een nieuwe gebruiken uit een onbeschadigde verpakking. Gooi het condom weg in de vuilnisbak. Spol het niet door het toilet. Het condom is uitsluitend bestemd voor eenmalig gebruik en als het wordt hergebruikt, kan er een verhoogd risico op beschadiging of infectie optreden. Het condom is gemaakt van natuurlijk rubberlatex dat tot allergi-

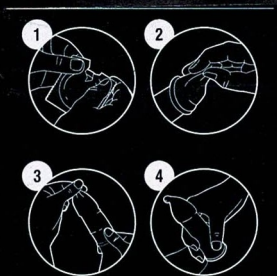

Distributor:
R&S consumer goods GmbH
 Wasserburger Landstraße 264
 81827 München · Germany
 www.mysize.de
 AMOR Gummiwaren GmbH · August-Ribot-Straße 4 · 99310 Arnstadt · Germany

CE 0197
 ISO 4074
 Rev. 2022-05

